


răzuitor pentru limbă

for every tongue

- 90% din respirația urât mirositoare este cauzată acumularile de pe limbă
- esential pentru o igiena orala completa
- curățare în doi pași, este ușor!
- pentru orice formă și dimensiune a limbii
- testat ca fiind cel mai confortabil și eficient

Cum se utilizează

Curățare în doi pași, este ușor!

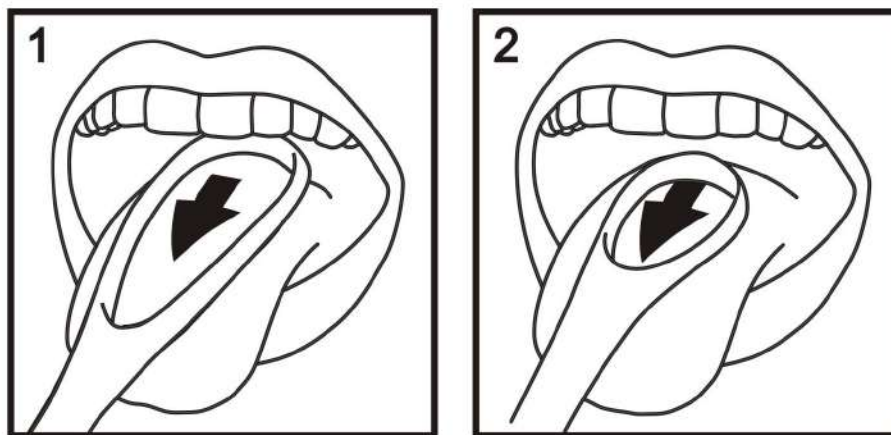

Pasul 1 - curățare pe toată lățimea

Utilizați partea largă a racletei pentru a vă curăța limba de la margine la margine. Răzuiți de maxim 3 ori din spate în față.

Pasul 2 - curățarea în zona de mijloc

Utilizați partea îngustă pentru a curăța mijlocul limbii. Datorită curburii naturale a limbii, această parte este deseori greu de curățat cu latura lată. Folosiți mișcări scurte în față și în spate. Schimbați unghiul racletei dacă este nevoie. Îl poți personaliza în funcție de limba ta.

Încearcă și experimentează ceea ce funcționează cel mai bine pentru tine.

Producător: Bluem Europe, Enkweg 6c, 8131 VH Wijke, NL, Produs in the Netherlands

Importator: Bluem OralCare SRL, str. Ipotești nr. 4, București, România

www.bluemcare.ro