



SONIC WARM & COOL MASK | 9 IN 1

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Youthful Glow Massage Technology
- Full Facial Hyper-Infusion Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Eye-Nose Area Targeted Design

2
Minut
Tratament facial
ultrarevitalizant

2
Minut
Tratament facial
ultrarevitalizant



Create your personal Skincare Routine
and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
12117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

USE WITH
GESKE DEVICES ONLY



PRIMII PAȘI

DESCHIDE

Scoate inelul magnetic exterior și așază șervețelul GESKE pe suprafața metalică a dispozitivului.

APLICĂ

Aplică masca, serul sau crema hidratantă preferată GESKE pe șervețel.

ATAȘEAZĂ

Atașează inelul magnetic pentru a fixa cu ușurință șervețelul.



Pornit/Oprit

Apasă timp de 1-2 secunde



Masaj

12 intensități



Răcire


Revitalizare



Încălzire

Deschiderea porilor

Timp de încărcare 4h

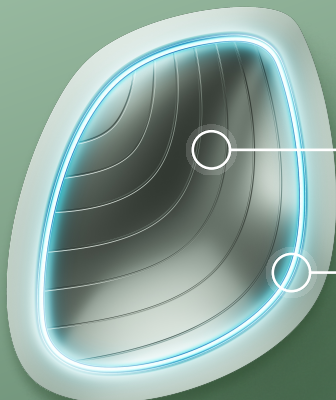

Aplicarea măștii

Super eficient



LED-Light Technology

8 culori

STĂPÂNEȘTE PRIMII PAȘI

Aplică eficient o mască facială, combate primele semne ale îmbătrânirii sau bucură-te de masaje calde și reci - toate acestea și multe altele cu SmartAppGuided™ Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1.



PREGĂTIREA SESIUNII

PREGĂTIRE

Îndepărtează ușor inelul care fixează masca din partea de sus a dispozitivului. Așază materialul textil pe dispozitiv și fixează-l cu inelul. Apoi, aplică o mască GESKE pe material.

PORNIRE

Activați SmartSonic Pulsation Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Selectați intensitatea dorită folosind butoanele „Plus” și „Minus”.

ÎNCĂLZIRE

Apasă pictograma „Soare” pentru a activa Pore-Opening Deep Warming Technology.

LUMINI LED

Apasă butonul de pornire pentru a comuta la culoarea LED dorită. Fiecare culoare are un efect de hrănire diferit asupra pielii tale.



TRATAMENT FACIAL ULTRAREVITALIZANT ÎN 2 MINUTE

APLICARE

Frecă dispozitivul pe față în cercuri mici. Continuă această procedură timp de 90 de secunde, asigurându-te că acoperi toate zonele feței.

EFECT

Tehnologia noastră brevetată Pore-Opening Deep Warming ajută pielea să absoarbă eficient ingredientele active ale măștii tale preferate GESKE.

RĂCIRE

După ce ai terminat de aplicat, apasă pictograma „Fulg de zăpadă” pentru a activa tehnologia Cryo Deep Cooling Revitalizing. Aceasta închide porii, păstrând înăuntru substanțele hidratante.

FINALIZARE

Oprește dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Îndepărtează șervețelul și aruncă-l. Curăță dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare și pune inelul înapoi.

Creați-vă rutina personalizată de îngrijire a tenului

și Descărcați aplicația noastră GESKE



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Citiți informațiile de siguranță înainte de prima utilizare. Păstrați ambele instrucțiuni de utilizare.

Produsul dvs. dintr-o privire

Produsul dvs. este un dispozitiv de aplicare a măștilor multifuncțional. Utilizarea sa este sigură de până la 3 ori pe zi, vă rugăm să nu utilizați mai des. Vă rugăm să nu utilizați modul de lumină și pulsație mai mult de o dată pe zi. Pentru siguranță maximă și rezultate ideale, urmați întotdeauna rutina dvs. personalizată de skincare, creată prin intermediul aplicației GESKE. Descărcați aplicația GESKE și obțineți rutina dvs. personalizată.

OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, aceste informații de siguranță și Ghidul rapid de pornire trebuie citite în întregime. Ambele instrucțiuni trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante privind utilizarea în siguranță, precum și despre cerințele tehnice și legale. Dispozitivul este un produs de skincare pentru adulți, nu un dispozitiv medical sau un produs cu proprietăți medicale sau alte proprietăți vindecătoare. Utilizarea prevăzută include, de asemenea, respectarea Ghidului rapid de pornire, avertismentele enumerate aici și recomandările de aplicare personalizate de la GE. Dispozitivul este reîncărcabil și permite operarea comodă și fără fir. Trebuie să fie încărcat complet înainte de prima utilizare. Aveți nevoie doar de cablul de încărcare USB inclus. Încărcarea inițială poate dura până la opt ore. Cablul trebuie să fie conectat cu ambele contacte magnetice la punctele de contact metalice desemnate ale dispozitivului. Dacă cablul de încărcare nu se atașează singur, conectați-l la priză și așteptați. Acest lucru reactivează efectul magnetic și contactele se conectează automat. Asigurați-vă că contactele magnetice se conectează numai la punctele de contact ale dispozitivului și nu la alte suprafețe metalice.

Specificații

Materiale: ABS, silicon, aliaj de aluminiu | **Temperatura de depozitare:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3.7V | **Capacitatea bateriei:** 800 mAh | **Curent maxim de încărcare:** 450 mA | **Tensiune de încărcare:** 5V | **Timp de încărcare:** aprox. 4 ore | **Timpul de funcționare** diferă în funcție de tehnologiile și intensitățile activate. | **Interfață:** USB | **Programe:** Vibrație: 10 intensități, Încălzire, Răcire

Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în următoarele condiții:

Nu utilizați dacă știți că sunteți hipersensibili la căldură (de exemplu, urticarie termică). Dacă în timpul utilizării apare o senzație de căldură (prea) intensă, opriți-vă imediat.

Informații suplimentare despre utilizare:

Nu utilizați produsul pe pielea iritată sau vătămată sau pe răni deschise (după orice fel de leziune), în cazul infecțiilor bacteriene sau virale ale pielii (atât în zona de utilizare, cât și în alte zone). Acest produs nu este destinat să trateze boli sau afecțiuni medicale ale pielii. Dacă aveți afecțiuni medicale ale pielii sau boli, consultați medicul dermatolog înainte de a utiliza acest produs. Nu utilizați produsul dacă este 1) neobișnuit de cald, 2) deteriorat sau deformat mecanic, 3) decolorat. Dacă apare durere și/sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului. Zona ochilor este foarte sensibilă: Fiți deosebit de atenți în această zonă și evitați orice contact al produsului cu ochiul însuși. Utilizați produsul numai așa cum este recomandat în rutina dvs. personalizată. Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împărtășiți produsul dvs. cu nimeni altcineva. Produsul este destinat utilizării cosmetice pe față. GESKE nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele dăunătoare care decurg din utilizarea pe alte zone ale corpului sau alte utilizări necorespunzătoare, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, lichide conducătoare contaminate sau bile. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul și priza sunt complet uscate înainte de încărcare. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, un scurtcircuit sau un incendiu. Produsul nu trebuie utilizat în timp ce este conectat la priză.

Avertizări

Pericol de rănire dacă este utilizat incorect!

Utilizați produsul numai așa cum este descris în Ghidul de pornire rapidă și în instrucțiunile video. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la support@geske.com.

Pericol de rănire din cauza flăcărilor/aprinderii!

Nu stingeți produsul cu apă. Nu aruncați produsul în foc.

Risc de rănire din cauza bateriilor defecte!

Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate provoca o reacție externă necontrolată. În acest caz, aruncați întregul produs imediat și în mod corespunzător.

Pericol de rănire a copiilor!

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Pericol de rănire prin electrocutare!

Lichidul poate deteriora circuitul de încărcare și vă poate pune în pericol sănătatea. Deconectați produsul de la cablul/circuitul de încărcare în timpul curățării.

Pericol de deteriorare din cauza câmpurilor magnetice!

Câmpurile magnetice pot afecta componentele mecanice și electronice, cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace. Nu utilizați produsul direct peste un stimulator cardiac. Contactați medicul curant pentru mai multe informații. Nu așezați corduri cu benzi magnetice (de exemplu, corduri de credit) în apropierea produsului, deoarece magnetii produsului le pot deteriora.

Risc de deteriorare din cauza schimbării temperaturii ambientale!

Modificarea temperaturii ambientale (de exemplu, după transport) poate duce la formarea condensului. În acest caz, nu utilizați produsul până când nu s-a adaptat la noua temperatură ambientală. Nu expuneți niciodată produsul la lumina directă a soarelui, la căldură extremă sau la apă clocotită.

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.



Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

În contextul distribuției bateriilor și bateriilor reîncărcabile, în conformitate cu reglementările europene, suntem obligați să vă informăm pe dvs., consumatorul, despre următoarele: Sunteți obligat legal să returnați bateriile și bateriile reîncărcabile. După utilizare, le puteți ține și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.



Aceste simboluri înseamnă că bateriile și bateriile reîncărcabile nu pot fi aruncate de dvs., consumatorul, prin gunoii menajer. Bateriile și bateriile reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt etichetate cu unul dintre aceste simboluri. Simbolul constă dintr-un coș cu roți tăiat și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

Observații privind bateriile cu litiu/bateriile reîncărcabile

Puteți recunoaște bateriile cu litiu și bateriile reîncărcabile cu litiu prin simbolul chimic Li*. Pe lângă informațiile furnizate mai sus, dorim să subliniem și următoarele: Când aruncați bateriile cu litiu sau bateriile reîncărcabile, fie returnându-le la noi, ducându-le la un punct de colectare municipal sau predându-le comercianților locali sau companiilor publice de eliminare a deșeurilor, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt complet descărcate. De asemenea, vă rugăm să acoperiți suprafețele de contact de pe baterie marcate cu „+” și „-” cu bandă adezivă pentru a evita riscul de incendiu.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin declară prin prezenta că toate dispozitivele electronice sunt conforme cu condițiile relevante ale Directivelor europene aplicabile 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Limitarea răspunderii

GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul ai acestora sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al GESKE Beauty Tech GmbH, al unui reprezentant sau al unui agent indirect, în conformitate cu directivele legale. Cu excepția vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul sunt răspunzători numai pentru daunele care pot fi atribuite unui comportament intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În plus, răspunderea față de consumatori datorată unei garanții asumate, cu excepția cazului de comportament intenționat sau de neglijență gravă, sau în cazul în care există o vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății și o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) este limitată la daunele tipice, previzibile la încheierea contractului, precum și la nivelul daunelor medii tipice pentru acest contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În ceea ce privește companiile, cu excepția cazurilor de punere în pericol a vieții, a integrității corporale și a sănătății sau a unui comportament intenționat sau din neglijență gravă din partea GESKE Beauty Tech GmbH și/sau a comercianților săi, răspunderea este limitată la daunele medii tipice, prevăzute la momentul încheierii contractului și, de asemenea, la nivelul daunelor medii tipice ale acestui contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. Nu va fi atribuită nicio răspundere pentru daunele cauzate de: Nerespectarea prezentului manual/ Utilizarea necorespunzătoare/Modificări neautorizate/Modificări tehnice/Utilizarea de piese de schimb neaprobate/Utilizarea de accesorii neaprobate. Revendicările privind obligațiile de răspundere în temeiul legislației germane privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.