



# MICRONEEDLE FACE & BODY ROLLER | 8 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



Red Light Active Regeneration Technology



DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology



Cell Stimulation System



Impurities Prevention Technology



Fine Lines Refinement Technology



Energizing Cooling Technology

Accesorii  
Incluse


**MicroNeedle  
cu răcire**

**Create your personal  
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com

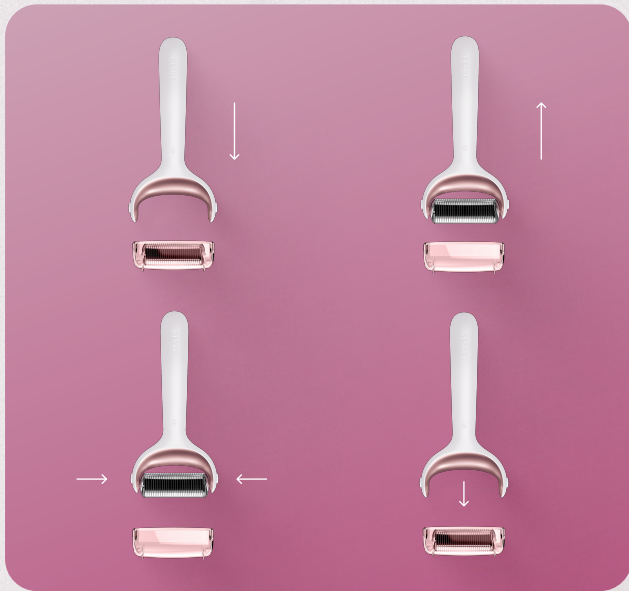

## BINE DE ȘTIUT

### PASUL 01

Utilizați suportul nostru special furnizat pentru a atașa rola MicroNeedle pe dispozitivul dvs. Asigurați-vă că nu atingeți direct acele. Atașamentul include 1680 de ace de 0,3 mm.

### PASUL 02

Puneți rola de răcire la frigider pentru câteva ore înainte de a o folosi. Apoi, atașați-o pe dispozitiv pentru a începe sesiunea.

### PASUL 03

După ce ați terminat sesiunea, pulverizați rola cu un spray cu alcool, în timp ce o rotiți pentru a vă asigura că toate zonele sunt acoperite. Lăsați-o să se usuce. Apoi, așezați capacul pe dispozitiv.



### Accesoriu MicroNeedle

Reînnoirea pielii DeepDerma



### Pulsații sonice

Calmează și relaxează



### Pornit/Oprit

Apăsăți timp de 1-2 secunde

Timp de încărcare 2,5 ore



### Accesoriu de răcire

Piele revitalizată



## STĂPÂNIȚI PRIMII PAȘI

Stimulați-vă pielea cu MicroNeedle Face & Body Roller | 8 în 1 SmartAppGuided™. Acest dispozitiv inovator de înfrumusețare vine cu un cap cu micro-ace și un cap de răcire.



### MICRONEEDLING FACIAL ENERGIZANT

#### PREGĂTIRE

Începeți cu tenul curat, fără machiaj. Montați accesoriul MicroNeedle pe dispozitiv.

#### PORNIRE

Activați SmartSonic Pulsation Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

#### ROLA

Împărțind fața în patru cadrane, rulați pe fiecare secțiune câte 15 secunde. Lucrați în linii verticale, orizontale și diagonale. Apoi, rulați pe gât și decolteu timp de 60 de secunde fiecare.

#### FINALIZARE

Opriti dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și aplicați un ser GESKE pe față și pe gât. Igienizați rola și curățați-vă dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



### ROLĂ PENTRU RĂCORIRE

#### PREGĂTIRE

Începeți cu tenul curat, fără machiaj. Scoateți rola pentru răcorire energizantă din congelator și montați-o pe dispozitiv.

#### PORNIRE

Activați SmartSonic Pulsation Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

#### ROLA

Rotiți cu mișcări verticale pe bărbie și pe linia maxilarului. Sprijiniți dispozitivul de față și rulați-l ușor pe zonele din jurul și între ochi între 15 și 30 de secunde. În cele din urmă, așezați dispozitivul pe frunte și rulați-l în mișcări verticale până la linia părului.

#### FINALIZARE

Opriti dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Igienizați rola și curățați-vă dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.

### Creați-vă rutina personalizată de îngrijire a tenului

și Descărcați aplicația noastră GESKE



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



## INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Citiți informațiile de siguranță înainte de prima utilizare. Păstrați ambele instrucțiuni de utilizare.

### Produsul dvs. dintr-o privire

Produsul dvs. este o rolă dermatologică multifuncțională cu micro-ace. Este sigur să fie utilizat de până la 2 ori pe săptămână, de maximum 3 ori pe săptămână. Vă rugăm să nu îl utilizați mai frecvent. Această limitare se aplică doar pentru cea mai intensă funcție a dispozitivului: microneedling. Pentru siguranță maximă și rezultate ideale, urmați întotdeauna rutina dvs. personalizată de skincare, creată prin intermediul aplicației GESKE.

### Note privind utilizarea

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie citite în întregime aceste informații de siguranță și manualul produsului. Vă rugăm să vă asigurați că păstrați o copie a ambelor documente, deoarece acestea conțin informații importante privind utilizarea în siguranță, precum și informații tehnice și juridice. Dispozitivul este un produs de îngrijire a pielii pentru adulți și nu un dispozitiv medical sau un produs cu proprietăți medicale sau alte proprietăți curative. Utilizarea dispozitivului trebuie să respecte întotdeauna recomandările personalizate ale aplicației din aplicația GESKE Beauty App.

### Specificații

**Materiale:** silicon, ABS, PC, oțel inoxidabil | **Temperatura de depozitare:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3.7V | **Capacitatea bateriei:** 140 mAh | **Curent maxim de încărcare:** 140 mA | **Tensiune de încărcare:** 5V | **Timp de încărcare:** aprox. 2,5 ore | **Timpul de funcționare diferă în funcție de tehnologiile și intensitățile activate.** | **Interfață:** USB | **Programe:** Vibrație: 1 treaptă de viteză, tehnologie de iluminat cu LED: 1 culoare

### Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în următoarele condiții:

În cazul în care suferiți de cancer de piele sau în stadii precanceroase (keratoză actinică) și în cazul în care suferiți de boli hemoragice (tulburări congenitale de coagulare a sângelui) și/sau luați medicamente care afectează coagularea sângelui, după un tratament cu laser sau peeling chimic și după o intervenție chirurgicală facială, indicat atât cosmetic, cât și medical. Siguranța și eficacitatea produsului nu au fost niciodată evaluate împreună cu produse și măști de îngrijire a pielii non-GESKE. Vă recomandăm să utilizați produsul numai cu produsele GESKE. Utilizați cu alte produse pe propriul risc. După tratament cu laser sau peeling chimic. După operații estetice faciale.

### In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

În cazul în care aveți o boală de inimă, în caz de sarcină, sau dacă faceți tratamente tip filler sau injecții dermice. Siguranța utilizării în timpul sarcinii nu a fost stabilită.

### Informații suplimentare despre utilizare:

Aplicați o presiune ușoară numai atunci când utilizați capul de microneedling. Utilizarea unui dispozitiv cu micro-ace (microneedling) poate avea drept rezultat o ușoară inflamație a pielii sau vânăți. Hidratați-vă bine după fiecare sesiune. Evitați exercițiile fizice, înotul și expunerea la soare timp de 24 de ore după efectuarea unei sesiuni de microneedling. Dacă nu puteți evita expunerea la soare, aplicați o protecție solară cu SPF ridicat. A nu se aplica machiaj timp de 24 de ore. Evitați utilizarea produselor ce conțin acizi și parfumuri, precum și exfolierea fizică și produsele exfoliante în timpul și după o sesiune de microneedling. Utilizarea produselor cu ingrediente active precum vitamina C sau retinolul poate duce la o iritare mai intensă a pielii. Dacă această iritație persistă o perioadă mai lungă de timp, solicitați sfatul medicului. Dezinfecțeați accesoriul cu ace după fiecare utilizare folosind un spray cu alcool și lăsați-l să se usuce la aer. Nu utilizați produsul pe pielea iritată sau vătămată sau pe răni deschise (după orice fel de leziune). În cazul infecțiilor bacteriene sau virale ale pielii (atât în zona de utilizare, cât și în alte zone). Nu utilizați produsul pe nevi, alunițe sau alte leziuni (benigne) ale pielii. Acest produs nu este destinat să trateze boli sau afecțiuni medicale ale pielii. Dacă suferiți de afecțiuni medicale sau boli de piele, consultați medicul dermatolog înainte de a utiliza acest produs. Nu utilizați produsul dacă este 1) neobișnuit de cald, 2) deteriorat sau deformat mecanic, 3) decolorat. Dacă apare durere și/sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului. Produsul poate emite lumină intensă, evitați aplicarea lui în direcția sau în apropierea unui ochi deschis. Zona ochilor este foarte sensibilă: Fiți deosebit de atenți în această zonă și evitați orice contact al produsului cu pleoapele sau cu ochiul însuși. Utilizați produsul numai așa cum este recomandat în rutina dvs. personalizată. Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împărțiți produsul cu nimeni altcineva. Produsul este destinat utilizării cosmetice pe față și părți ale corpului, așa cum este recomandat în aplicația GESKE Beauty. GESKE nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele dăunătoare care decurg din utilizarea pe alte zone ale corpului sau alte utilizări necorespunzătoare, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, lichide conducătoare contaminate sau bile. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul și priza sunt complet uscate înainte de încărcare. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, un scurtcircuit sau un incendiu. Produsul nu trebuie utilizat în timp ce este conectat la priză.

### Avertizări

**Pericol de rănire dacă este utilizat incorect!**

Utilizați produsul numai așa cum este descris în Ghidul de pornire rapidă și în instrucțiunile video. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la [support@geske.com](mailto:support@geske.com).

Pericol de rănire din cauza flăcărilor/aprinderii!



**Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE.** Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electrice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajeri. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

### Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

În contextul distribuției bateriilor și bateriilor reîncărcabile, în conformitate cu reglementările europene, suntem obligați să vă informăm pe dvs., consumatorul, despre următoarele: Sunteți obligat legal să returnați bateriile și bateriile reîncărcabile. După utilizare, le puteți returna la noi, le puteți duce la un punct de colectare municipal sau le puteți livra gratuit unui dealer local. Bateriile și bateriile reîncărcabile sunt etichetate după cum urmează:



Aceste simboluri înseamnă că bateriile și bateriile reîncărcabile nu pot fi aruncate de dvs., consumatorul, prin gunoii menajeri. Bateriile și bateriile reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt etichetate cu unul dintre aceste simboluri. Simbolul constă dintr-un coș cu roți tăiat și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă:

### Observații privind bateriile cu litiu/bateriile reîncărcabile

Puteți recunoaște bateriile cu litiu și bateriile reîncărcabile cu litiu prin simbolul chimic Li\*. Pe lângă informațiile furnizate mai sus, dorim să subliniem și următoarele: Când aruncați bateriile cu litiu sau bateriile reîncărcabile, fie returnându-le la noi, ducându-le la un punct de colectare municipal sau predându-le comercianților locali sau companiilor publice de eliminare a deșeurilor, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt complet descărcate. De asemenea, vă rugăm să acoperiți suprafețele de contact de pe baterie marcate cu „+” și „-” cu bandă adezivă pentru a evita riscul de incendiu.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin declară prin prezenta că toate dispozitivele electronice sunt conforme cu condițiile relevante ale Directivelor europene aplicabile 2014/30/UE și 2011/65/UE.

### Limitarea răspunderii

GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul ai acestora sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al GESKE Beauty Tech GmbH, al unui reprezentant sau al unui agent indirect, în conformitate cu directivele legale. Cu excepția vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul sunt răspunzători numai pentru daunele care pot fi atribuite unui comportament intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În plus, răspunderea față de consumator datorată unei garanții asumate, cu excepția cazului de comportament intenționat sau de neglijență gravă, sau în cazul în care există o vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății și o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) este limitată la daunele tipice, previzibile la încheierea contractului, precum și la nivelul daunelor medii tipice pentru acest contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În ceea ce privește companiile, cu excepția cazurilor de punere în pericol a vieții, a integrității corporale și a sănătății sau a unui comportament intenționat sau din neglijență gravă din partea GESKE Beauty Tech GmbH și/sau a comercianților săi, răspunderea este limitată la daunele tipice, prevăzute la momentul încheierii contractului și, de asemenea, la nivelul daunelor medii tipice ale acestui contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. Nu va fi atribuită nicio răspundere pentru daunele cauzate de: Nerespectarea prezentului manual/ Utilizarea necorespunzătoare/Modificări neautorizate/Modificări tehnice/Utilizarea de piese de schimb neaprobate/Utilizarea de accesorii neaprobate. Revendicările privind obligațiile de răspundere în temeiul legislației germane privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.