
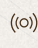







# MICROCURRENT SKIN SCRUBBER & BLACKHEAD REMOVER | 9 IN 1

 Skin Scan & Personal  
Routine Guide


 SmartSonic  
Pulsation Technology


 MicroCurrent  
Face-lift Technology

 Youthful Glow  
Massage Technology

 ION- Deep  
Nurturing Technology

 ION+ Ultra Hygienic  
Deep Cleansing

 Red Light Active  
Regeneration Technology

 Pore-Opening Deep  
Warming Technology

 Dry and Dead Cell  
Removing Technology

**Spune la  
revedere**

Celulelor  
moarte



**Create your personal  
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## PRIMII PAȘI

**PASUL 01**

Asigurați-vă că dispozitivul este uscat înainte de a porni MicroCurrent Face-Lift Technology.

**PASUL 02**

Utilizați întotdeauna gelul nostru hidratant MicroCurrent special conceput pentru a îmbunătăți efectul sesiunii dvs.

**PASUL 03**

Curăța dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



**Pulsații sonice**

Calmează și relaxează



**ION+ Technology**

Deep Cleansing



**ION- Technology**

Umiditate bogată



**Lumină LED roșie**

Anti-îmbătrânire



**Microcurrent**

Lifting facial, instantaneu



**Încălzire profundă**

Deschiderea porilor



## STĂPÂNEȘTE PRIMII PAȘI

Mai multe tehnologii de ultimă oră într-un singur dispozitiv: SmartAppGuided™ MicroCurrent SkinScrubber & Blackhead Remover | 9 în 1 este dispozitivul perfect pentru o piele radiantă și fără pete.



### EXFOLIAZĂ, RIDICĂ SAU HIDRATEAZĂ

#### PREGĂTIRE

Asigurați-vă că fața dvs. este curată și fără machiaj și aplicați gelul nostru special conceput hidratant MicroCurrent. Porniți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

#### EXFOLIAZĂ

Folosind butonul de pornire, comutați între funcții până când indicatoarele LED ale pictogramelor „Exfoliere” și „Soare” sunt aprinse, activând Ion+ Deep Cleansing Technology și Pore-Opening Deep Warming Technology.

#### RIDICĂ

Folosind butonul de pornire, comutați între funcții până când indicatoarele LED ale pictogramelor „Fulger” și „Soare” sunt aprinse, activând MicroCurrent Face-Lift Technology și Pore-Opening Deep Warming Technology.

#### HIDRATEAZĂ

Folosind butonul de pornire, comutați între funcții până când indicatoarele LED ale pictogramelor „Hidratare” și „Soare” sunt aprinse, activând ION- Deep Nurturing Technology și Pore-Opening Deep Warming Technology.



### ETAPELE SESIUNII

#### POZIȚIE

Țineți dispozitivul astfel încât luminile LED să nu fie îndreptate înspre dvs. și înclinați spatula la 30 de grade.

#### SCRUB

Glisiți dispozitivul de la bărbie către buze. Deplasați-vă spre nas și glisați dispozitivul în sus de-a lungul nasului și pe părțile laterale ale acestuia. Apoi, glisați dispozitivul de la bărbie în sus și în exterior spre pomeți. Repetați pe cealaltă parte a feței.

#### REVIGOREAZĂ

Dry and Dead Cell Removing Technology acționează asupra straturilor profunde ale pielii, scoțând murdăria și resturile din interiorul porilor, în timp ce Microcurrent Face-Lift Technology stimulează mușchii pielii pentru a strânge și a netezi liniile fine.

#### FINALIZARE

Opriti dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și clătiți-l cu un săpun blând și apă pentru a-l curăța. Curățați dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.

### Creați-vă rutina personalizată de îngrijire a tenului

și Descărcați aplicația noastră GESKE



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



