


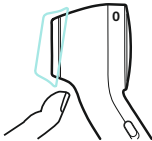


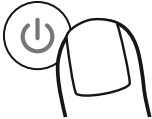

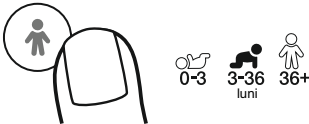


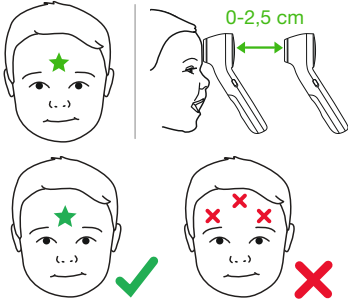



Măsurarea temperaturii unei persoane

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

	Temperatură normală	Febră	Febră mare
Interval vârstă			
0-3 luni	$\geq 35,8 - \leq 37,4^{\circ}\text{C}$		$> 37,4^{\circ}\text{C}$
>3-36 luni	$\geq 35,4 - \leq 37,6^{\circ}\text{C}$	$> 37,6 - \leq 38,5^{\circ}\text{C}$	$> 38,5^{\circ}\text{C}$
>36 luni-adult	$\geq 35,4 - \leq 37,7^{\circ}\text{C}$	$> 37,7 - \leq 39,4^{\circ}\text{C}$	$> 39,4^{\circ}\text{C}$

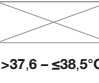Măsurarea temperaturii alimentelor sau a apei de îmbăiere

Urmați pașii:

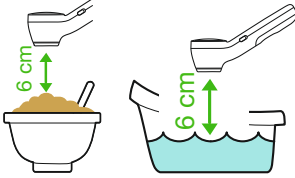- 1 & 2 
- 3 
- 4 
- 5 



Sfaturi pentru măsurarea temperaturii

Pentru realizarea unei măsurări exacte și de încredere, respectați aceste indicații:

- 1**
- Termometrul trebuie lăsat la temperatura camerei timp de 10 minute înainte de realizarea măsurătorii.
 - Persoana a cărei temperatură urmează să fie măsurată trebuie să rămână în interiorul încăperii timp de 30 de minute înainte de realizarea măsurătorii.




10 minute





30 minute



- 2**
- Ștergeți orice urmă de transpirație cu un prosop uscat.
 - Asigurați-vă că fruntea este curată. Dacă vă curățați fruntea, așteptați 10 minute înainte de realizarea măsurătorii.
 - Înlăturați părul de pe frunte și așteptați 10 minute înainte de realizarea măsurătorii.

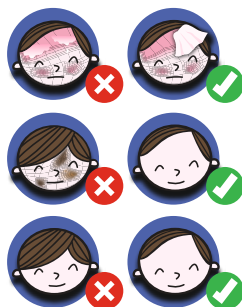

3 ✓

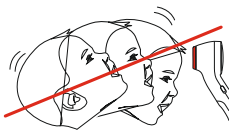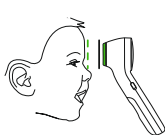

✓

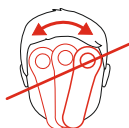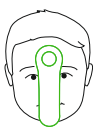

0-2,5 cm



Mutați termometrul mai aproape de frunte.



- 4**
- Murdăria, praful și impuritățile pot influența citirea. Pentru instrucțiuni de curățare, consultați secțiunea privind Îngrijirea și curățarea, din manualul de utilizare.

