


Instrucțiuni de utilizare

Waterpik®
CORDLESS PLUS
WP WF-26EU WHITE CORDLESS PLUS 6PK
WP WF-26EU BLACK CORDLESS PLUS 6PK

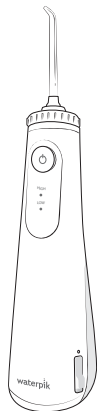

1.1 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Nu așezați sau depozitați produsul unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuveță.
- Nu puneți și nu scăpați produsul în apă sau orice alt lichid.
- Nu încercați să recuperați un produs care a căzut în apă. Dacă acesta este la încărcat, scoateți-l imediat din priză.
- Nu manipulați cablul sau adaptorul USB cu mâinile ude.
- Scoateți din priză cablul și adaptorul USB atunci când nu sunt în uz. Verificați cablul de alimentare pentru eventuale deteriorări înainte de prima utilizare și pe întreaga durată de viață a produsului.

1

1.2 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizați acest produs doar conform indicațiilor din aceste instrucțiuni sau conform recomandărilor medicului stomatolog. Nu utilizați acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă a fost scăpat în apă sau orice alt lichid.
- Pentru încărcarea produsului este nevoie de un încărcător Type-C, cu USB pentru perete (adaptor), certificat (IPX4, Class II) cu un output de 5.0 V , 3.0 Amps Max. Acesta nu este furnizat de către producător.
- Nu conectați acest aparat la un sistem de tensiune diferit de sistemul de tensiune specificat pe dispozitiv sau pe încărcător.
- Păstrați cablul de încărcare și încărcătorul USB departe de suprafețele încălzite.
- Nu introduceți și nu lăsați să pătrundă obiecte străine în orice deschidere sau furtun.

2

1.3 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în locuri în care se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Umpleți rezervorul doar cu apă caldută sau cu alte soluții recomandate de medicul stomatolog, având grijă ca ulterior să curățați rezervorul în mod corespunzător, conform instrucțiunilor. În cazul în care acești pași nu sunt respectați, garanția produsului va fi ANULATĂ.
- Utilizați doar vârfuri și accesorii recomandate de Water Pik, Inc.
- În cazul în care cablul de încărcare se deteriorează, trebuie înlocuit de unul specific disponibil la producător sau la agentul de service.
- Nu utilizați iod, soluție salină sau uleiuri esențiale concentrate insolubile în apă în acest produs. Utilizarea acestora va reduce performanța produsului și va scurta durata de viață a acestuia. Utilizarea acestor produse poate anula garanția.
- Nu direcționați jetul de apă sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat este capabil să producă presiuni care pot provoca daune serioase în aceste zone. Amoeba potențial mortală, Naegleria Fowleri, poate fi prezentă în unele ape de la robinet sau în apa de fântână neclorinată și poate fi fatală dacă este direcționată în nas sau urechi.
- Dacă urmați un tratament cu antibiotice, în special antibiotic înainte de proceduri stomatologice, trebuie să consultați stomatologul înainte de a utiliza acest aparat sau orice alt dispozitiv de igienă orală.
- Îndepărtați orice bijuterie orală sau dentară înainte de utilizarea acestui produs.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți o rană deschisă pe limbă sau oriunde altundeva în cavitatea orală.

3


1.4 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați dușul bucal mai mult de cinci minute la fiecare două ore.
- Dacă vârful Pik Pocket™ (nu este inclus în toate modelele) se separă de tija de susținere din orice motiv, aruncați atât vârful, cât și tija, și înlocuiți-le cu un nou vârful Pik Pocket™.
- Acest aparat nu are nicio parte electrică ce necesită reparații sau mentenanță care să fie efectuate de către utilizator.
- Înlăturați cablul de încărcare din aparat și acoperiți mufa de încărcare înainte de umplerea rezervorului.
- Asigurați-vă că toate contactele de pe cablu, aparat și adaptor sunt uscate în timpul încărcării.
- Câmp magnetic: Stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale implantate similare pot fi afectate de magneți. Contactați medicul înainte de utilizare.
- Nu expuneți bateriile sau aparatul la temperaturi excesive.


2.1 DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capăt rotativ
2. Buton de pornire
3. Indicatori de presiune
4. Mâner
5. Port de încărcare/capac port
6. Rezervor
7. Capăt
8. Cablu de încărcare
9. Ușă de umplere a rezervorului
10. Indicator nivel baterie
11. Buton de ejectare a capătului

Cablul de încărcare
20034096-2 (Alb)

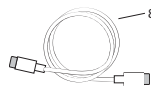

Adaptor USB (nu este inclus)

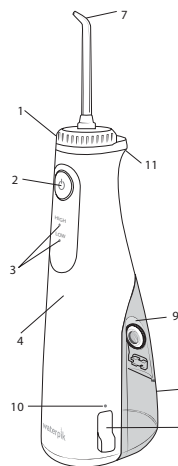

5

2.2 DESCRIEREA PRODUSULUI

CAPETE DE UTILIZARE (NU TOATE CAPETELE SUNT INCLUSE ÎN TOATE MODELELE):

A. Capătul ortodontic*

Aparat dentar/Utilizare generală

B. Capătul Pik Pocket™**

Pungi parodontale/leziuni de furcație

C. Capătul Plaque Seeker™**

Implanturi/Coro ane/Punți/Retainere

D. Capătul Classic Jet**


Utilizare generală

E. Capătul curățător de limbă*

Curățarea limbii pentru o respirație proaspătă

*Înlocuiți la fiecare 3 luni

**Înlocuiți la fiecare 6 luni

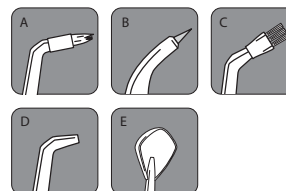

6

3.1 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII



Unitatea de încărcare înainte de prima utilizare

Conectați cablul de încărcare la un adaptor USB (nu este inclus), apoi conectați-l la priză. Atașați celălalt capăt la aparat. Încărcați pentru 4 ore înainte de prima utilizare. O încărcare completă ține până la 9 săptămâni cu utilizare standard. Asigurați-vă că portul de încărcare este acoperit după încărcare.

Indicatorul LED pentru nivelul bateriei

- LED-ul va lumina cu alb pentru indicarea faptului că bateria este aproape de a fi descărcată.
- LED-ul va lumina cu roșu atunci când bateria este complet descărcată, indicând faptul că aparatul trebuie pus la încărcat.
- LED-ul va lumina intermitent atunci când aparatul se încarcă.
- LED-ul va rămâne aprins în permanență pentru a indica faptul că bateria este complet încărcată, până când încărcătorul este deconectat.

Umplerea rezervorului

Ridicați clapeta rezervorului și umpleți-l cu apă caldută.



Atenție: Deconectați întotdeauna încărcătorul și acoperiți portul de încărcare înainte de umplerea rezervorului.

Inserarea și eliminarea capetelor

Inserați capătul de curățare în partea de sus a aparatului. Pentru a-l elimina, apăsați butonul de ejectare și trageți de capăt în sus.

AVERTIZARE: Nu apăsați butonul de ejectare în timp ce aparatul este în funcțiune.

7

NU ARUNCAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Este demonstrat că dușurile bucale Waterpik™ cu TEHNOLOGIA PRECISION PULSE oferă o combinație eficientă de presiune a apei și pulsații care înlătură placa bacteriană ce poate cauza gingivită, carii, și respirație cu un miros neplăcut.

4



Ajustarea setării de presiune
Apăsăți butonul de pornire. Aparatul va porni la treapta de jos, cu presiunea cea mai slabă (low). Apăsăți butonul power a doua oară pentru a transforma setarea de presiune într-una mai puternică (high). Apăsarea butonului pentru a treia oară va opri aparatul. Creșteți presiunea gradual în timp în funcție de preferințe sau în funcție de recomandarea stomatologului.



Tehnica recomandată
Aplecați-vă deasupra chiuvetei și poziționați capătul de curățare în cavitatea orală. Îndreptați vârful spre dinți și porniți aparatul. Pentru cele mai bune rezultate, începeți cu dinții din spate și continuați către cei din față. Glisați vârful de-a lungul liniei gingivale, oprind în spațiile dintre dinți. Continuați până când ați curățat atât partea interioară, cât și cea exterioară a ambelor rânduri de dinți. Direcționați jetul la un unghi de 90 de grade față de linia gingivală. Apropiați buzele pentru a evita stropirea, dar lăsați destul spațiu pentru ca apa să curgă din cavitatea orală în chiuvetă. Țineți aparatul drept pentru cele mai bune rezultate.
Sfat: Priviți către chiuvetă și nu către oglindă pentru a reduce stropirea.
Puteți ajusta direcția capătului de curățare cu o singură atingere datorită capacității acestuia de a se roti la 360 de grade.



După utilizare
Opriți aparatul. Eliminați apa din rezervor. Dacă se dorește, rezervorul poate fi scos din cadru trăgându-l în jos.


Travel mode/Modul de călătorie:
• Localizați butonul de pornire.
• Apăsăți butonul și țineți apăsat timp de 5 secunde până când aparatul arată semnalul luminos. Aparatul este acum în modul de călătorie.
• Cât timp aparatul este în modul de călătorie, acesta nu va porni.
• Pentru a opri modul de călătorie, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde, până la semnalul luminos.
• Verificați dacă aparatul a revenit la modul standard de funcționare prin încercarea butonului și a funcționalităților obișnuite.
IMPORTANT: Modul de călătorie este dezactivat automat atunci când aparatul este pus la încărcat.



ATENȚIE: NU TOATE CAPETELE SUNT INCLUSE LA TOATE MODELELE
UTILIZAREA CAPETELOR DE CURĂȚARE
Capătul Pik Pocket™
Vârful Pik Pocket™ este special conceput pentru a distribui apă sau soluții antibacteriene adânc în pungile parodontale. Pentru a utiliza vârful Pik Pocket™, setați unitatea la cea mai mică presiune. Plasați vârful moale pe un dinte la un unghi de 45 de grade și introduceți ușor vârful sub linia gingiei, în punga parodontală.
Capătul ortodontic
Pentru a utiliza capătul ortodontic, glisați ușor vârful de-a lungul gingiei, oprindu-vă scurt pentru a peria ușor zona dintre dinți și în jurul bracketului ortodontic, înainte de a trece la următorul dinte.
Capătul curățător pentru limbă
Setați la cea mai mică treaptă de presiune, plasați vârful în centrul/mijlocul limbii, cam la jumătatea distanței. Trageți înainte apăsând ușor. Măriți presiunea în funcție de preferințe.
Capătul Plaque Seeker™
Pentru a utiliza capătul Plaque Seeker™, plasați vârful aproape de dinți, astfel încât perii să atingă ușor dinții. Glisați ușor vârful de-a lungul gingiei, oprindu-vă scurt între dinți pentru a peria ușor și a permite apei să curgă între dinți.

Utilizarea apei de gură și a altor soluții
În cazuri excepționale și doar la recomandarea medicului stomatolog, dușul bucal poate fi utilizat cu apă de gură sau soluții antibacteriene. Pentru a vă asigura că nu se anulează garanția produsului, este absolut necesar să urmați pașii de curățare a aparatului după fiecare utilizare a aparatului cu soluțiile respective.
Curățarea
Nu imersați niciodată aparatul în apă. Înainte de curățarea aparatului, deconectați-l de la priză. Curățați produsul atunci când este necesar folosind o cârpă moale și un detergent ușor, neabraziv, pentru a șterge exteriorul.
Rezervorul de apă este detașabil pentru o curățare ușoară și poate fi spălat în mașina de spălat vase, pe raftul superior. Se recomandă ca rezervorul să fie scos și curățat săptămânal pentru a asigura o performanță optimă.
Îndepărtarea depunerilor de apă dură / Curățare generală
Depunerile de apă dură se pot acumula în aparat, în funcție de conținutul de minerale al apei. Dacă această problemă nu este adresată, ea poate afecta performanța dușului bucal.
Curățarea pieselor interne: adăugați 1 lingură de oțet alb într-un rezervor plin cu apă caldă. Îndreptați mânerul și vârful în chiuvetă. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când rezervorul este gol. Clătiți repetând procesul cu un rezervor plin cu apă caldă curată. Acest proces trebuie efectuat la fiecare 1 până la 3 luni pentru a asigura o performanță optimă.

Îngrijirea bateriei
Dacă dușul bucal va fi depozitat pentru o perioadă lungă de timp (șase luni sau mai mult), asigurați-vă că îl încărcați complet înainte de depozitare. Nu expuneți bateria sau aparatul la temperaturi excesive.
Eliminarea/Reciclarea bateriei
Acest produs conține o baterie reincărcabilă litiu-ion. Bateria nu este înlocuibilă. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl aruncați la gunoiul menajer sau în coșurile de reciclare. Vă rugăm să reciclați la cel mai apropiat centru de reciclare sau să îl duceți la un punct de colectare a deșeurilor periculoase pentru a respecta reglementările locale și naționale. Aruncați bateria uzată imediat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu o dezasamblați și nu o aruncați în foc. Vă rugăm să contactați departamentul local de administrare a deșeurilor pentru orice întrebări.
Atenție: Bateria reincărcabilă nu este înlocuibilă, scoateți-o doar la sfârșitul duratei de viață a produsului. Acest proces este ireversibil și anulează garanția produsului.
Îndepărtarea bateriei
Pentru a scoate bateria reincărcabilă în vederea reciclării, vă rugăm să o descărcați complet înainte de a o scoate. Respectați măsurile de siguranță de bază atunci când urmați procedura de mai jos. Asigurați-vă că vă protejați ochii, mâinile, degetele și suprafața pe care lucrați.

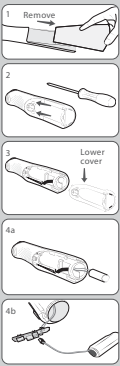

1. Îndepărtați rezervorul.
2. Utilizând o șurubelniță Phillips, înlăturați șuruburile indicate în ilustrație.
3. Eliminați capacul.
4. Îndepărtați partea de jos a cadrului.
5. Îndepărtați bateria (a) și deconectați de la circuit (b).
6. Bateria scoasă trebuie eliminată în siguranță la un centru de reciclare specializat.
AVERTIZARE: NU ȚIAȚI AMBELE FIRE ELECTRICE ALE BATERIEI ÎN ACELAȘI TIMP! NU dezasamblați, loviți, găuriți, strângeți sau aruncați bateria în foc.
Service de întreținere
Dușurile bucale Waterpik® nu conțin componente electrice care pot fi reparate de către consumator și nu necesită întreținere de rutină. Pentru toate nevoile dumneavoastră de service, accesați www.dentamericadistribution.ro. De asemenea, puteți suna la numărul de asistență pentru clienți la +40 769 059 907. Pentru eficiență, este util să aveți la îndemână numerele de serie și de model. Aceste numere se află pe partea inferioară a unității. Încă aveți întrebări? Accesați www.waterpik.com.

Service de întreținere
Pentru întrebări sau probleme, vă rugăm să sunați la centrul de asistență pentru clienți înainte de a returna produsul. Vă rugăm să nu trimiteți unitatea la adresa Water Pik, Inc., deoarece acest lucru poate cauza întârzieri lungi. Este util să țineți cont și să comunicați numerele de serie și de model în toată corespondența. Water Pik, Inc. garantează pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției cumpărătorului inițial al acestui produs nou faptul că aparatul nu prezintă defecte materiale și de fabricație. Consumatorul va fi obligat să prezinte bonul fiscal original ca dovadă a datei achiziției și, dacă este solicitat, întregul produs, pentru a susține o cerere de garanție. Produsul va fi înlocuit cu condiția ca acesta să nu fi fost utilizat în mod abuziv sau greșit, să nu fi fost modificat sau deteriorat după cumpărare, să fi fost utilizat conform instrucțiunilor și să fi fost utilizat numai cu accesorii sau piese consumabile aprobate de Water Pik, Inc. Această garanție limitată exclude accesoriiile sau piesele consumabile, cum ar fi capetele, bateriile etc. Accesoriiile de înlocuire pot fi achiziționate online de pe site-ul www.dentamericadistribution.ro, sau telefonic la +40 769 059 907.
Atenție: Acest produs se folosește exclusiv cu apă. Folosirea oricărui alt lichid duce automat la pierderea garanției!
Pentru a beneficia de garanție utilizați produsul doar cu apă, conform instrucțiunilor. Folosirea necorespunzătoare a altor lichide atrage pierderea garanției.



Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA 1-800-525-2774
www.waterpik.com
www.dentamericadistribution.ro