
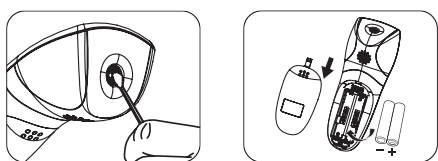


Termometrul MBP66NT a fost dezvoltat cu grijă, pentru a fi precis, sigur și rapid - măsoară temperatura corpului fără contact, la o distanță de 2.5-3 cm (sau 1 inch) și temperatura obiectelor.






Dispozitivul este un termometru medical nesteril, reutilizabil, destinat determinării temperaturii corpului fără contact direct, folosind fruntea ca suprafața de măsurare și este potrivit pentru toate vârstele.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Cheia pentru obținerea măsurătorilor exacte este un senzor curat. Curățarea senzorului: utilizați un material din bumbac ușor umezit cu alcool, ștergeți ușor suprafața acestuia și apoi ștergeți imediat cu o parte uscată a materialului textil. Așteptați cel puțin 20 de minute înainte de a lua temperatura, pentru a vă asigura că senzorul este uscat complet.
- Lipidele de pe suprafața pielii de pe frunte pot cauza o inexactitate a măsurătorii.
- Glisați ușor capacul locasului bateriilor și instalați cele 2 baterii alcaline AAA, 1,5V, conform polarității corespunzătoare, atașați capacul, apoi apăsați butonul  pentru a porni termometrul.






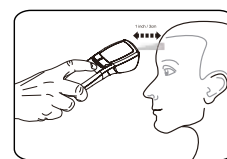
MĂSURAREA TEMPERATURII FRUNTII

- Apăsați butonul  pentru a porni termometrul. Când dispozitivul este pregătit, pe ecran va apărea „- -”.
- Asigurați-vă că termometrul este setat în modul „frunte” .
- Poziționați termometrul la aproximativ 3 cm de centrul frunții cu senzorul orientat între sprâncene.
- Apăsați o dată butonul .
- Când măsurarea este finalizată, aceasta se va încheia cu un ton de confirmare.
- Dacă temperatura este sub 38°C / 100.4°F, simbolul  va fi afișat pe ecran și LED-ul verde va fi aprins.
- Dacă temperatura este de 38°C / 100.4°F sau mai mare, simbolul  va fi afișat pe ecran și LED-ul roșu va fi aprins.
- La aproximativ 30 de secunde după utilizare, termometrul va emite un bip și se va opri automat.


Dacă pielea este acoperită cu păr, transpirație sau murdărie, curățați zona și așteptați 10 minute înainte de a măsura temperatura. Măsurați temperatura în interiorul casei dvs. Țineți termometrul în camera pacientului cel puțin 30 de minute înainte a-l folosi. Asigurați-vă că termometrul este ținut ferm și că pacientul nu se mișcă până la finalizarea măsurătorii. Alarma luminoasă în cazul temperaturii înalte va fi activă în modul frunte și modul funte-silentios.

MĂSURAREA TEMPERATURII OBIECTULUI

- Apăsați butonul  pentru a porni termometrul.
- Asigurați-vă că termometrul este setat în modul „obiect” .
- Poziționați termometrul la aproximativ 3 cm de obiect.
- Apăsați o dată butonul  apoi va fi afișată temperatura măsurată.
- La aproximativ 30 de secunde după utilizare, termometrul va emite un bip și se va opri automat.



OPTIUNEA CELSIUS / FAHRENHEIT

În modul de așteptare, puteți comuta între Celsius (°C) și Fahrenheit (°F) apăsând și ținând apăsat simultan pe simbolurile .

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Pentru a asigura măsurători precise, este foarte important să păstrați senzorul infraroșu curat și fără zgârieturi. Ampretele digitale și murdăria vor afecta precizia termometrului.

Pentru a obține o măsurare exactă, vă rugăm să curățați senzorul infraroșu. Ștergeți suprafața cu un material din bumbac ușor umezit cu alcool și ștergeți imediat cu o parte uscată.

