

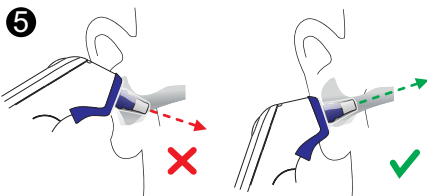


Ghid rapid de pornire

ThermoScan® 7+ Termometru auricular

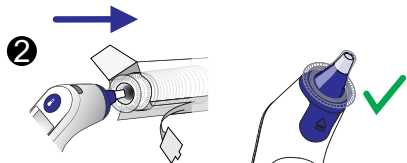


Modul de noapte

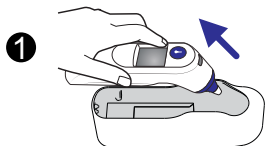

În modul de noapte toate semnalele sonore sunt dezactivate iar lanterna se va aprinde. Modul de noapte poate fi activat oricând dispozitivul este pornit.





Interval vârstă	Temperatură normală	Febră	Febră mare
	37,0°C	38,1°C	38,8°C
0-3 luni	35,8 - 37,4°C	>37,4°C	>37,4°C
3-36 luni	35,4 - 37,6°C	37,7 - 38,5°C	>38,5°C
36 luni - adulți	35,4 - 37,7°C	37,8 - 39,4°C	>39,4°C

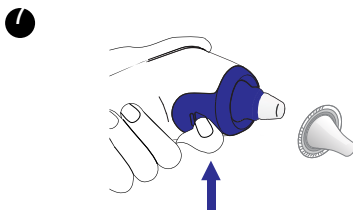


! IMPORTANT


Asigurați-vă că fixați bine capacul igienic.
Înlocuiți capacul igienic după fiecare utilizare.
Ceara din urechi poate compromite
acuratețea măsurătorii.
Utilizați numai capacele igienice originale
Braun.

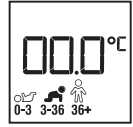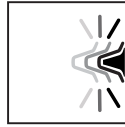

Păstrați sonda curată.
Nu scufundați niciodată sonda
termometrului în apă sau în alte lichide.

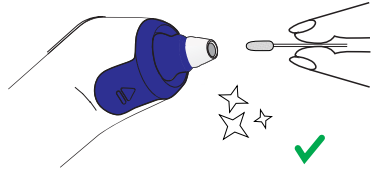

Eroare de poziție - Mențineți sonda nemișcată
în ureche.

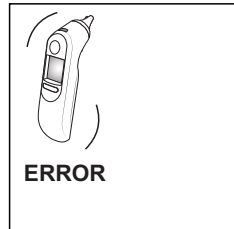

MD REF IRT6525NOEE

www.BraunHealthcare.com

© 2020, Toate drepturile rezervate

ThermoScan® este o marcă înregistrată Helen of Troy sau de către afiliații săi

Anumite mărci comerciale sunt utilizate sub licența The Procter & Gamble Company sau de către afiliații săi.

Kaz Europe Sàrl, a Helen of Troy Company, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Elveția

