

TONIMER

ISOTONIC SPRAY 300 m0sm/kg

EN_INDICATIONS

Sterile isotonic sea water solution with a slightly alkaline pH, indicated to remove and fluidify the mucus in the nasal passages in case of dryness of the mucous membranes and colds, thus facilitating more comfortable breathing. It contains no preservatives and does not disperse propellant (air), as it is not in contact with the product, thus reducing the possibility of allergic reactions.

The product is indicated:

- in TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY and TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY presentations for adults;
- in TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY presentation for adults with hypersensitive mucous membranes;
- in TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY presentation for newborns and children.

The presence of the non-return valve and a sac that isolates the physiological solution:

- guarantees sterility;
- makes it possible to use the bottle in any direction (360°);
- prevents mucus from being sucked into the bottle.

DIRECTIONS FOR USE:


wash your hands before use.

- Once the cap is removed, children who are able to use the product on their own (under adult supervision) may do so by tilting the bottle at any angle. It is best applied by leaning over a washbasin, tilting the head to one side and inserting the spray nozzle into the upper nostril. Press on the nozzle till the product is sprayed for the recommended time (see dispensing times and frequency of use). Repeat the same procedure in the other nostril (drawing 1).
- For newborns and children requiring adult assistance:
 - lie the child on its side, insert the nozzle into the upper nostril and press for the recommended time. Turn the child onto its other side and repeat the same procedure in the other nostril (drawing 2).
- After use, always wash and dry the nozzle and close the container using the cap supplied.

DISPENSING TIMES AND FREQUENCY OF USE:

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 1-2 seconds/nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 5 seconds/nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (adults): press on the dispenser for 1 second/nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY (newborns and children): press on the dispenser for 5 seconds/nostril. The recommended frequency is 2-3 applications a day, 3-4 hours apart for 15 days, or according to medical advice.

WARNINGS: for nasal use. For personal use only. Do not use the product if the bottle appears to be damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to an intact, correctly stored product. Do not exceed the recommended dosage. Do not use the product if you know you are sensitive to any of its components. In rare cases, temporary burning of

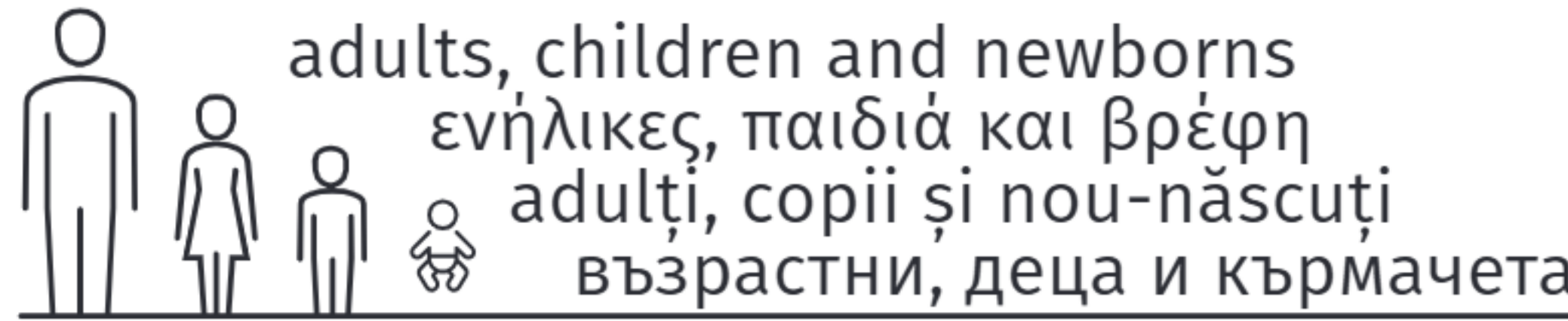

the mucous membranes or slight nasal bleeding can occur. This will not compromise the safety and efficacy of the product. TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (strong jet) should not be used on newborns and children unless advised by a doctor. It is not recommended for adults with particularly sensitive nasal mucous membranes or susceptibility to epistaxis. Stop using the product, consult your doctor and inform the manufacturer if side effects occur. If symptoms persist after treatment, consult your doctor. There are no contraindications related to using the product during pregnancy and breastfeeding. The product should only be used on newborns under paediatric advice. Drugs and medical devices for inhalation must only be taken simultaneously with the product under the supervision of a doctor who can assess possible interactions. In the event of serious accidents related to administration of one of the products from TONIMER ISOTONIC SPRAY line, please send a report to the manufacturer (customercare@ganassini.it), the Italian Ministry of Health or the competent authority of the EU member state or of the country in which the product was used. Avoid contact with the eyes; in the event of contact, rinse with water. Keep the product out of the reach and sight of children. Dispose of the device responsibly after use. **Store with the cap closed, away from heat, in a cool and dry place. Warning** Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children. Do not make use other than those specified.

GR_ENDEIΞEIS

Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα θαλασσινού νερού με ελαφρώς αλκαλικό pH, που ενδείκνυται για την απομάκρυνση και ρευστοποίηση της βλέννας στις ρινικές κοιλότητες σε περιπτώσεις ζηρότητας των βλεννογόνων και κρυολογημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί μια πιο άνετη αναπνοή. Δεν περιέχει συντηρητικά και δεν απελευθερώνει πρωθητικό αέριο, καθώς αυτό δεν έρχεται σε επαφή με το προϊόν, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων.

Το προϊόν ενδείκνυται:

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY και TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY για ενήλικες
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY για ενήλικες με υπερευαίσθητο βλεννογόνο
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY για βρέφη και παιδιά.

Η παρουσία της μονόδρομης βαλβίδας και ενός αόκου που απομονώνει το φυσιολογικό διάλυμα:

- εγγυάται στείρες συνθήκες
- καθιστά εφικτή τη χρήση του μπουκαλιού σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (360°)
- αποτρέπει την αναρρόφηση της βλέννας στο μπουκάλι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πλύνετε τα χέρια σας πριν τη χρήση.

- Αφού αφαιρεθεί το καπάκι, τα παιδιά που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το προϊόν μόνο τους (υπό την επίβλεψη ενήλικα) μπορούν να το κάνουν στρέφοντας το μπουκάλι σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εφαρμόζεται καλύτερα αν γείρετε επάνω από ένα νιπτήρα, στρέψετε το κεφάλι στη μία πλευρά και εισάγετε το ρύγχος του σπρέι στο επάνω ρουθούνι. Πιέστε το ρύγχος συνεχόμενα μέχρι να χορηγηθεί το προϊόν για τη καθορισμένη διάρκεια (βλ. διάρκεια ψεκασμού και συχνότητα χρήσης). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στο άλλο ρουθούνι (σχέδιο 1).
- Για βρέφη και παιδιά που χρειάζονται τη βοήθεια ενήλικα: Ξαπλώστε το παιδί στο πλάι, εισάγετε το ρύγχος στο επάνω ρουθούνι και πιέστε για το καθορισμένο διάστημα. Γυρίστε το παιδί στην άλλη πλευρά και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το άλλο ρουθούνι (σχέδιο 2).

- Μετά τη χρήση, πάντα να πλένετε και να στεγνώνετε το ρύγχος και να κλείνετε τον περιέκτη με το ειδικό καπάκι του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε συνεχόμενα τον ψεκαστήρα για 1-2 δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές την ημέρα, με διαφορά 3-4 ωρών για 15 ημέρες, ή σύμφωνα με την συμβουλή του γιατρού.
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε συνεχόμενα τον ψεκαστήρα για δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές την ημέρα, με διαφορά 3-4 ωρών για 15 ημέρες, ή σύμφωνα με την συμβουλή του γιατρού.
- TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (ενήλικες): πιέστε συνεχόμενα τον ψεκαστήρα για 1 δευτερόλεπτο/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές την ημέρα, με διαφορά 3-4 ωρών για 15 ημέρες, ή σύμφωνα με την συμβουλή του γιατρού.
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY (βρέφη και παιδιά): πιέστε συνεχόμενα τον ψεκαστήρα για 5 δευτερόλεπτα/ρουθούνι. Η συνιστώμενη συχνότητα είναι 2-3 εφαρμογές την ημέρα, με διαφορά 3-4 ωρών για 15 ημέρες, ή σύμφωνα με την συμβουλή του γιατρού.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Για ρινική χρήση. Για ατομική χρήση μόνο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το μπουκάλι φαίνεται κατεστραμμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε ένα άθικτο, σωστά αποθηκευμένο προϊόν. Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη δόσολογία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής υπερευαίσθησίας σε οποιοδήποτε συστατικό του. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί παροδικό αίσθημα καούσου των βλεννογόνων ή ελαφριά επίταση. Αυτό δεν διακυβεύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Το TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (υψηλής πίεσης ψεκασμός) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογνήτητα και παιδιά εκτός αν υποδειχθεί διαφορετικά από γιατρό και δεν συστήνεται σε ενήλικες με ιδιαίτερα ευαίσθητους ρινικούς βλεννογόνους ή επιρρεπείς σε επίταση. Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και ενημερώστε τον κατασκευαστή. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν μετά την αγωγή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις που να σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βρέφη μόνο υπό συμβουλή παιδίατρού. Η συγχρόνηση εισπνεόμενων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γιατρού ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει πιθανές αλληλεπιδράσεις. Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χορήγηση ενός προϊόντος από την σειρά TONIMER ISOTONIC SPRAY, παρακαλούμε αποστείλετε αναφορά στον κατασκευαστή (customercare@ganassini.it), το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, ή την αρμόδια αρχή του μέλους της ΕΕ ή της χώρας στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια: σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από μέρη που βλέπουν και μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά. Μετά τη χρήση, απορρίψτε την συσκευή με υπεύθυνο τρόπο. **Να φυλάσσεται με το καπάκι κλειστό, μακριά από θερμότητα σε δροσερό, ξηρό μέρος.** Προσοχή Δοχείο υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F. Μακριά από παιδιά. Μην κάνετε χρήση πέρα από τη προβλεπόμενη.

RO_INDICAȚII

Soluție sterilă izotonică de apă de mare cu un pH ușor alcalin, indicată pentru a elimina și fluidifica mucusul din căile nazale, în caz de uscăciune a mucoaselor și răceală, facilitând astfel o respirație mai confortabilă. Nu conține conservanți și nu eliberează agent de propulsie (aer), deoarece acesta nu este în contact cu produsul, reducând astfel posibilitatea apariției unor reacții alergice.


Produsul este indicat:

- în TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY și TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY, forme de prezentare pentru adulți;
- în forma de prezentare TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY pentru adulți cu membrane

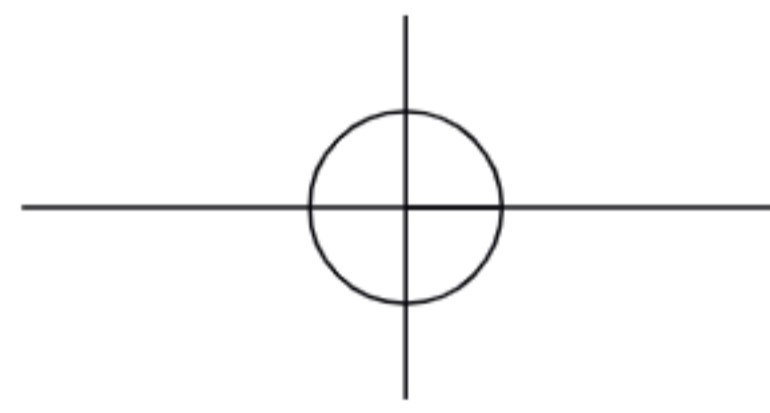

CLIENT: **TONIMER ISOTONIC SOFT EXPORT SPRAY 300 LETTERATURA vendita FORMATO 180 X 240 mm**
DATE: **07.2024 EN-GRECO-RUM-BULG Fornitore: DERMOFARM COD M30087310**

N° COLORI :	1	NERO	BIANCA
-------------	----------	-------------	---------------

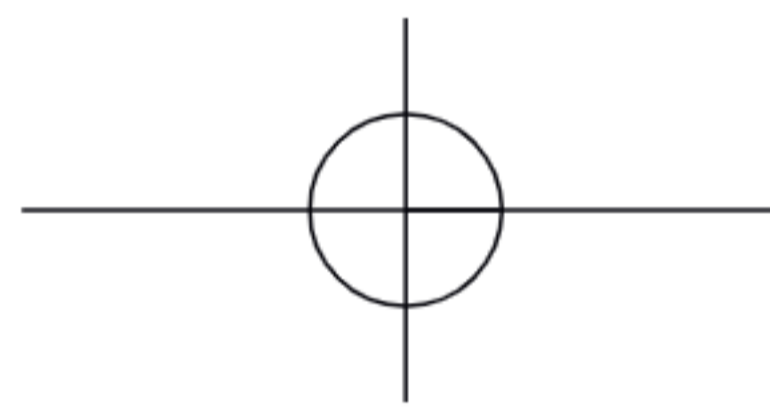

- mucoase hipersensibile;
 - în forma de prezentare TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY pentru nou-născuți și copii.
- Prezența supapei de non-retur și a unui sac care izolează soluția fiziologică:
- garantează sterilitatea;
 - face posibilă utilizarea flaconului în orice direcție (360°);
 - împiedică aspirarea mucusului în interiorul flaconului.

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Spălați-vă pe mâini înainte de utilizare.

- Odată ce capacul este îndepărtat, copiii care sunt capabili să folosească singuri produsul (sub supravegherea unui adult) pot face acest lucru înclinând flaconul în orice unghi. Cel mai bine se aplică prin aplecarea peste o chiuvetă, înclinarea capului într-o parte și introducerea duzei de pulverizare în partea superioară a nării. Apăsăți pe duză până când produsul este pulverizat pentru timpul recomandat (a se vedea timpii de distribuire și frecvența de utilizare). Repetați aceeași procedură în cealaltă nară (figura 1).
- Pentru nou-născuți și copii care necesită asistență din partea unui adult: așezați copilul pe o parte, introduceți duza în partea superioară a nării și apăsați pentru timpul recomandat. Intoarceți copilul pe cealaltă parte și repetați aceeași procedură în cealaltă nară (desenul 2).
- După utilizare, spălați și uscați întotdeauna duza și închideți recipientul cu ajutorul capacului furnizat.

TIMPII DE ADMINISTRARE ȘI FRECVENȚA DE UTILIZARE

- TONIMER NORMAL ISOTONIC SPRAY (adulți): apăsați pe dozator timp de 1-2 secunde/nară. Frecvența recomandată este de 2-3 aplicări pe zi, la 3-4 ore distanță, timp de 15 zile, sau conform recomandării medicale.
- TONIMER SOFT ISOTONIC SPRAY (adulți): apăsați pe dozator timp de 5 secunde/nară. Frecvența recomandată este de 2-3 aplicări pe zi, la 3-4 ore distanță, timp de 15 zile, sau conform recomandării medicale.
- TONIMER STRONG ISOTONIC SPRAY (adulți): apăsați pe dozator timp de 1 secundă/nară. Frecvența recomandată este de 2-3 aplicări pe zi, la 3-4 ore distanță, timp de 15 zile, sau conform recomandării medicale.
- TONIMER ISOTONIC BABY SPRAY (nou-născuți și copii): apăsați pe dozator timp de 5 secunde/nară. Frecvența recomandată este de 2-3 aplicări pe zi, la 3-4 ore distanță, timp de 15 zile, sau conform recomandării medicale.

ATENȚIONĂRI: pentru utilizare nazală. Numai pentru uz personal. Nu utilizați produsul dacă flaconul pare deteriorat. Nu folosiți produsul după data de expirare. Data de expirare se referă la un produs intact și corect depozitat. Nu depășiți doza recomandată. Nu utilizați produsul dacă știți că sunteți sensibil la oricare dintre componentele sale. În cazuri rare, pot apărea arsuri temporare ale mucoaselor sau ușoare sângerări nazale. Acest lucru nu va compromite siguranța și eficacitatea produsului. Întrerupeți utilizarea produsul, adresați-vă medicului dumneavoastră și informați producătorul dacă apar reacții adverse. Dacă simptomele persistă după tratament, adresați-vă medicul dumneavoastră. Nu există contraindicații legate de utilizarea produsului în timpul sarcinii și alăptării. Produsul trebuie utilizat la nou-născuți numai cu recomandare pediatrică. Medicamentele și dispozitivele medicale pentru inhalare trebuie administrate simultan cu produsul numai sub supravegherea unui medic care poate evalua posibilele interacțiuni. În cazul unor accidente grave legate de administrarea unuia dintre produsele din gama TONIMER ISOTONIC SPRAY, vă rugăm să trimiteți un raport producătorului (customercare@ganassini.it), Ministerului Sănătății din Italia sau autorității competente a statului membru UE sau a țării în care a fost utilizat produsul. Evitați contactul cu ochii; în caz de contact, clătiți cu apă. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Aruncați dispozitivul în mod responsabil după utilizare. **A se păstra cu capacul închis, ferit de căldură, într-un loc răcoros și uscat. Avertisment**Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu utilizați altfel decât este specificat.

BG_ПОКАЗАНИЯ

Стерилен изотоничен разтвор на морска вода с леко алкално pH, предназначен за отстраняване и втечняване на секрет в носната кухина при сухота на лигавицата и настинки, като по този начин допринася за по-облекчено дишане. Не съдържа консерванти и не отделя пропелант (въздух), тъй като не е в контакт с продукта. Това намалява възможността за алергични реакции.

Продуктът е посочен:

- в TONIMER НОРМАЛ ИЗОТОНИК СПРЕЙ и TONIMER СТРОНГ ИЗОТОНИК СПРЕЙ – продукти за възрастни;
- в TONIMER СОФТ ИЗОТОНИК СПРЕЙ – продукт за възрастни със свръхчувствителна лигавица;
- в TONIMER ИЗОТОНИК БЕЙБИ СПРЕЙ – продукт за кърмачета и деца..

Наличието на възвратен клапан и сакче, което изолира физиологичния разтвор:

- гарантира стерилност;
- дава възможност за използване на флакона във всяка посока (360°);
- предотвратява засмукването на секрет в контейнера.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Измийте ръцете си преди употреба.

- След като капачката бъде отстранена, децата, които могат да използват продукта сами (под наблюдение на възрастен), могат да го направят, като наклонят контейнера под произволен ъгъл. Най-добре се нанася, като се наведете над мивка, наклоните главата на една страна и поставите дюзата за пръскане в горната ноздра. Натиснете найкрайника, докато продуктът се въпръска за препоръчаното време (вижте времето за дозиране и честотата на употреба). Повторете същата процедура и в другата ноздра (рис. 1).
- При кърмачета и деца, нуждаещи се от помощ на възрастен: Поставете детето да легне на една страна, поставете найкрайника в горната ноздра и натиснете за препоръчаното време. Обърнете детето на другата страна и повторете същата процедура в другата ноздра (рис. 2).
- След употреба винаги измивайте и подсушавайте найкрайника и затваряйте контейнера с капачката.

ВРЕМЕ ЗА ВПРЪСКВАНЕ И ЧЕСТОТА НА УПОТРЕБА:

- TONIMER НОРМАЛ ИЗОТОНИК (възрастни): натиснете върху дозатора за 1-2 секунди/ноздра. Препоръчителната честота е 2-3 приложения на ден, с интервал от 3-4 часа в продължение на 15 дни, или според медицински съвет.
- TONIMER СОФТ ИЗОТОНИК СПРЕЙ (възрастни): натиснете върху дозатора за 5 секунди/ноздра. Препоръчителната честота е 2-3 приложения на ден, с интервал от 3-4 часа в продължение на 15 дни, или според медицински съвет.
- TONIMER СТРОНГ ИЗОТОНИК СПРЕЙ (кърмачета и деца): натиснете дозатора за 1 секунда/ноздра. Препоръчителната честота е 2-3 приложения на ден, с интервал от 3-4 часа в продължение на 15 дни, или според медицински съвет.
- TONIMER ИЗОТОНИК БЕЙБИ СПРЕЙ (кърмачета и деца): натиснете дозатора за 5 секунди/ноздра. Препоръчителната честота е 2-3 приложения на ден, с интервал от 3-4 часа в продължение на 15 дни, или според медицински съвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: За употреба в нос. Само за лична употреба. Не използвайте продукта, ако контейнерът изглежда повреден. Не използвайте продукта след изтичане срока на годност. Срокът на годност се отнася за непоткнат, правилно съхраняван продукт. Не превишавайте препоръчаната доза. Не използвайте продукта, ако знаете, че сте чувствителни към някоя от съставките му. В редки случаи може да се появи временно изгаряне на лигавиците, или леко кървене от носа. Това няма да засегне безопасността и ефикасността на продукта. TONIMER СТРОНГ ИЗОТОНИК СПРЕЙ (съ струя под високо налягане) не трябва да се използва при кърмачета и деца, освен по съвет на лекар. Не се препоръчва при възрастни с особено чувствителна носна

лигавица или податливост към кръвотечение от носа. Спрете да използвате продукта, консултирайте се с Вашия лекар и уведовете производителя, ако възникнат нежелани реакции. Ако симптомите продължават след лечение, консултирайте се с Вашия лекар. Не съществуват противопоказания, свързани с употребата на продукта по време на бременност и кърмене. Продуктът трябва да се използва при кърмачета само по педиатричен съвет. Лекарствени продукти и медицински изделия за инхалация трябва да се приемат едновременно с продукта само под наблюдението на лекар, който може да оцени възможните взаимодействия. В случай на сериозни инциденти, свързани с прилагането на някой от продуктите от серията TONIMER ИЗОТОНИК СПРЕЙ, моля, изпратете сигнал на производителя (customercare@ganassini.it), Министерството на здравеопазването на Италия или компетентния орган на държавата-членка на ЕС, в която е използван продуктът. Избягвайте контакт с очите; в случай на контакт, изплакнете с вода. Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място. Изхвърляйте изделието отговорно след употреба. **Съхранявайте със затворена капачка, далеч от топлина, на хладно и сухо място. Внимание** Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пражка сплъччева светлина. Да не се излага на температура, по-високи от 50 °C/122 °F. Дръжте далеч от деца. Не използвайте за други цели, освен за посоченото приложение.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Maris Aqua (Sea Water)
27,32%.

INGREDIENTE:
Aqua (apă), Maris Aqua (apă de mare)
27,32%.



1)

2)

Ed. 07/2024 - Cod. M30087310					
ISTITUTO GANASSINI S.p.A. di Ricerche Biochimiche via P. Gaggia, 16 - 20139 Milano - Italy www.ganassinicorporate.com					
Distributor: ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA S.R.L Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr.7, Sector 6, București, România - Telefon (+4)021-4077711 Дистрибутор в България: Медифарм ЕООД , гр. София, ул. "Бяла бука" 1, 1220 тел: 02/9317150 e-mail: medipharm@abv.bg Διανομέας στην Ελλάδα: NESTORAS VLAΧOS I.K.E. - "EPSILON HEALTH" 140 χιλμ Θεσ/νίκης-Περαιάς, Αγροτεμ. υο.864 Δήμου Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τ.Θ. 60710, Τ. 2310 941150, fax 2310 922553 www.epsilon-health.gr					