

Instrucțiuni de folosire

Citiți cu atenție aceste informații pentru a vă ajuta la folosirea corespunzătoare a HYLO CARE®.

HYLO CARE®

Hialuronat de sodiu (1 mg/ml) și dexpantenol.

Pentru lubrifierea și susținerea vindecării suprafeței deteriorate a ochiului, de ex. din cauza ochilor ușați sau a procedurilor chirurgicale.

Soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți.

Ce este HYLO CARE®?

HYLO CARE® este o soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți, pentru utilizare oculară.

Compoziție:

1 ml de HYLO CARE® conține 1 mg de hialuronat de sodiu, dexpantenol, acid citric anhidru, citrat de sodiu și apă pentru preparate injectabile.

La ce este folosit HYLO CARE®?

Pentru lubrifierea și susținerea vindecării suprafeței deteriorate a ochiului, de exemplu din cauza ochilor ușați sau a procedurilor chirurgicale.

Când se folosește HYLO CARE®?

HYLO CARE® este indicat pentru tratamentul afecțiunii de ochi uscat.

Pentru a regenera și întreține suprafața oculară - corneea și conjunctiva - trebuie păstrată permanent umedă. În mod normal, acest rol este îndeplinit de lacrimile noastre. Cu toate acestea, în anumite cazuri, nu există suficiente lacrimi sau compoziția lor este anormală. În aceste cazuri, ochiul reacționează cu roșeață, mâncărime, senzație de corp străin și de arsură sau oboseală acută. Aceste simptome ale unui aport inadecvat cu lacrimi fiziologice pot apărea atât în medii uscate sau cu aer condiționat, cât și ca urmare a tratamentului medical sau - pur și simplu - datorate vârstei.

Celulele epiteliale ale corneei și conjunctivei sunt refăcute continuu și acest proces funcționează cel mai bine într-un mediu umed. Prin urmare, este vital, chiar și după proceduri chirurgicale, să păstrăm suprafața oculară suficient de lubrifiată, pentru a permite vindecarea adecvată a rănilor.

În toate aceste cazuri este recomandabil să furnizați ochiului o umidificare intensă, prin utilizarea HYLO CARE®, pentru refacerea balanței fiziologice de lubrifiere și umețcare a ochiului.

HYLO CARE® conține sarea de sodiu a acidului hialuronic, care este o substanță fiziologică a ochiului și a altor părți ale corpului. Hialuronatul de sodiu are proprietatea unică de a forma pe suprafața ochiului o peliculă de umețcare uniformă, stabilă și de lungă durată, fără a fi eliminată foarte rapid. Acest lucru prelungeste efectul de umidificare, fără a afecta vederea. Prin urmare, HYLO CARE® poate fi utilizat în timpul zilei, în timp ce unguentele și gelurile pentru ochi determină vederea încețoșată, din cauza consistenței lor grase.

În plus, HYLO CARE® conține dexpantenol, care aparține grupului vast al vitaminelor B. Această componentă sprijină ochiul în procesul de regenerare intensivă, în timp ce proprietățile lubrifiante ale hialuronatului de sodiu susțin suplimentar acest proces. În plus, dexpantenol favorizează vindecarea rănilor și astfel, atât eroziuni superficiale ale suprafeței oculare rezultate dintr-un film lacrimal insuficient, cât și rănilor rezultate uneori din proceduri chirurgicale, se vindecă mai repede.

HYLO CARE® asigură astfel umețcare corespunzătoare a ochiului și, în același timp, intensifică regenerarea epiteliei cornean și conjunctivale.

Cum ar trebui aplicat HYLO CARE®?

Vă rugăm, nu utilizați HYLO CARE® dacă oricare parte a sigiliului protector al ambalajului de carton a fost rupt sau deteriorat înaintea primei utilizări (®).



Pașul 1:

Înlăturați capacul înainte de utilizare.

Pentru acest scop, țineți de capacul situat deasupra dispozitivului. Cu cealaltă mână, scoateți dispozitivul din capac cu o mișcare rotativă. Înainte de prima aplicare, întoarceți dispozitivul HYLO CARE® cu vârful în jos și apăsați pe baza dispozitivului, până când apare prima picătură la duză. Acum dispozitivul este gata pentru utilizare ulterioară.



Pașul 2:

Țineți dispozitivul întors, cu degetul mare poziționat la baza picurătorului și celelalte degete pe baza dispozitivului.



Pașul 3:


Susțineți mâna ce ține dispozitivul COMOD® cu cealaltă mână, așa cum vedeți în imagine.



Pașul 4:

În momentul aplicării picăturilor, vă rugăm, evitați orice contact dintre vârful flaconului și ochiul și pielea dumneavoastră.

Cu capul ușor aplecat către spate, trageți ușor în jos pleoapa inferioară. Aplicați o presiune fermă și rapidă pe centrul bazei dispozitivului. Acest lucru va activa mecanismul de eliberare a unei picături. Datorită sistemului special COMOD® cu valvă, dimensiunea și viteza fiecărei picături rămân constante, indiferent de câtă presiune este aplicată. Închideți ușor ochiul pentru a permite fluidului să se distribuie în mod egal pe suprafața ochiului.

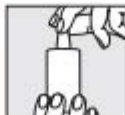

Pașul 5:

După folosire, puneți imediat și cu grijă capacul la loc. Aveți grijă ca vârful picurătorului să fie uscat.

Vă rugăm, contactați producătorul pentru orice întrebare despre utilizarea corectă a acestui dispozitiv medical.

Fiecare flacon eliberează 10 ml de soluție, ce este echivalentul a aproximativ 300 de picături. Din motive tehnice, o cantitate minoră rămâne în flacon.

HYLO CARE® este potrivit pentru tratament de lungă durată și poate fi utilizat atât de către adulți, cât și de copii, indiferent de vârstă.

HYLO CARE® este doar pentru dumneavoastră, nici măcar persoanele cu simptome similare nu ar trebui să utilizeze picăturile dumneavoastră (👤).

Ce altceva mai trebuie să știți dumneavoastră?

Dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după câteva zile de utilizare, adresați-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră.

Dacă folosiți alte picături pentru ochi, așteptați cel puțin 30 de minute între aplicări și întotdeauna HYLO CARE® utilizați-l ultimul. Unguentele oftalmice ar trebui oricum aplicate întotdeauna după folosirea HYLO CARE®.

Datorită lipsei conservanților, HYLO CARE® este bine tolerat chiar și în cazul utilizării pe termen lung. În cazuri foarte rare au fost raportate reacții adverse, precum hipersensibilitate, senzații de arsură sau lăcrimare excesivă, durere, senzație de corp străin sau iritație locală temporară, care au încetat după întreruperea utilizării HYLO CARE®.

HYLO CARE® poate fi utilizat în timpul purtării lentilelor de contact. După aplicarea lentilelor de contact, se recomandă să așteptați 30 de minute înainte de administrarea picăturilor. Astfel, evitați reacțiile de intoleranță ce pot să apară din cauza interacțiunii dintre soluțiile de îngrijire a lentilelor de contact și HYLO CARE®.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că după aplicarea HYLO CARE® este posibilă înțepărea vederii, datorită vâscozității soluției. În cazuri foarte rare, acest lucru poate determina dureri de cap temporare la pacienții sensibili.

Conform cunoștințelor actuale, HYLO CARE® poate fi utilizat la copii, femei însărcinate și femei care alăptează.

În cazul în care un incident grav a apărut în timpul utilizării acestui dispozitiv medical sau ca rezultat a utilizării sale, vă rugăm, raportați-l producătorului (🏭).

Cât de des și pe ce perioadă de timp puteți folosi HYLO CARE®?

În general, instalați o picătură de HYLO CARE®, de trei ori pe zi, în fiecare ochi. Dacă aplicați HYLO CARE® mai mult de 10 ori pe zi sau simptomele persistă pentru mai mult de o săptămână, vă rugăm să consultați medicul oftalmolog sau farmacistul dumneavoastră.

Când nu trebuie să folosiți HYLO CARE®?

HYLO CARE® nu ar trebui folosit dacă aveți hipersensibilitate la unul dintre ingredientele acestuia.

Ce trebuie să știți despre depozitarea HYLO CARE®?

Nu depozitați la temperaturi mai mari de 25 °C (🌡️ 25 °C).

HYLO CARE® poate fi folosit timp de 6 luni de la desigilare.

A nu se utiliza după data de expirare (📅).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Aruncați acest dispozitiv medical conform legislației naționale referitoare la deșeurile menajere. Această măsură va ajuta la protecția mediului.

Sunt disponibile următoarele variante de ambalaj:

Picături lubrifiante pentru ochi de 10 ml.

Data revizuirii prospectului:

Decembrie 2021

🏭 Producător:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Germania

🏪 Distribuitor:

AMD Nobel Pharmaceutical SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 8
Sector 2, București, România
031 104 0016 sau 0720 277 538
office@amd-nobel.ro



0197



Simbol:	Explicație:
	Producător
	Distribuitor
	Dispozitiv medical
	Marcaj CE
	Stenilizat, utilizând proceduri tehnice aseptice.
	Nu utilizați dacă ambalajul extern este deteriorat.
	Numărul lotului
	Data de expirare (YYYY-MM)
	Citiți Instrucțiunile de utilizare.
	Nu depozitați la temperaturi peste 25 °C.
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient.