

Thealoz® Duo Gel

Instrucțiuni de folosire

Acest produs este un dispozitiv medical. Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să îl citiți din nou.

INDICAȚII

THEALOZ DUO GEL este indicat pentru protejarea, hidratarea și lubrifierea ochiului în tratamentul sindromului de ochi uscat moderat până la sever.
Doar pentru administrare oftalmică.

POTRIVIT PENTRU

- Adulți,
- Copii: părinții sau îngrijitorii trebuie să administreze produsul,
- Femei însărcinate sau care alăptează, pe baza cunoștințelor actuale.

CONTRAINDICAȚII

Nu injectați și nu înghițiți.

Nu folosiți THEALOZ DUO GEL dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele acestuia (consultați Descrierea dispozitivului).

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

THEALOZ DUO GEL este un gel oftalmic ce conține trehaloză (3%), hialuronat de sodiu (0,15%), carbomer (Carbopol 974P, 0,25%), sorbitol, hidroxid de sodiu și apă pentru preparate injectabile.

THEALOZ DUO GEL este un gel lichid steril, fără fosfați, hipotonic având pH neutru.

Utilizarea THEALOZ DUO GEL este blândă pentru ochi, deoarece nu conține conservanți. Absența conservanților permite protejarea țesuturilor oculare și, de asemenea, nu provoacă reacții la utilizatorii sensibili la conservanți.

BENEFICIUL, PERFORMANȚA ȘI MECANISMUL DE ACȚIUNE

THEALOZ DUO GEL este recomandat în cazuri de disconfort, senzație de înțepături, corp străin sau iritare a ochiului datorită uscăciunii oculare moderate și severe. Aceste simptome pot fi cauzate de factori externi precum vântul, fumul, poluarea, praful, condiții ce implică expunerea la soare sau la frig, căldură uscată, aer condiționat, călătorii cu avionul ore lungi de lucru în fața ecranului calculatorului și intervenții chirurgicale la nivelul ochiului cum ar fi chirurgia refractivă și operația de cataractă.
THEALOZ DUO GEL oferă confort ochilor și ameliorare de lungă durată a simptomelor de ochi uscați așa cum este descris mai sus.

Principalele ingrediente ale THEALOZ DUO GEL sunt trehaloza, hialuronatul de sodiu și carbomerul (Carbopol 974P).

Trehaloza este o substanță naturală prezentă în multe plante și animale, care pot supraviețui în condiții extrem de uscate. Oferă proprietăți de protecție și hidratare. Hialuronatul de sodiu, care se găsește în mod natural în ochiul uman, reține apa pentru a hidrata și lubrifia suprafața ochiului. Menține soluția pe suprafața ochilor, oferind o senzație de ameliorare de lungă durată și reducând timpul de vindecare a suprafeței oculare.

Carbomerul permite THEALOZ DUO GEL să rămână pe suprafața ochiului mai mult timp, oferind o senzație de ameliorare de lungă durată a semnelor și simptomelor de ochi uscați.

Combinatia specială de trehaloză, hialuronat de sodiu și carbomer din THEALOZ DUO GEL oferă o protecție, hidratare și lubrifiere prelungită a suprafeței ochilor.

RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE

Dozare: 1 picătură în fiecare ochi, de la 1 la 4 ori pe zi.

Cu toate acestea, deoarece este un gel, THEALoz DUO GEL este potrivit în special pentru a fi folosit seara, chiar înainte de culcare.

Nu este necesară o pregătire specială pentru a utiliza THEALoz DUO GEL.

Dacă purtați lentile de contact: trebuie să le îndepărtați înainte de a utiliza THEALoz DUO GEL.

După utilizare, așteptați cel puțin 30 de minute înainte de a pune lentilele înapoi.

Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizare.

Deschideți plicul de aluminiu și luați un recipient unidoză de pe bandă.

Puneți restul benzii înapoi în plic.

Nu folosiți niciun instrument pentru a deschide recipientul.

Întarceți-l cu capul în jos, agitați-l ușor și bateți ușor cu degetul recipientul până când gelul coboară.


Deschideți recipientul răsucind cheița superioară.

Pentru a evita contaminarea, nu atingeți vârful recipientului cu nimic.

Strângeți până când vedeți picătura.

Aplicați o picătură în pliul pleoapei, în timp ce trageți ușor pleoapa inferioară în jos și priviți în sus. Închideți ușor ochiul după aplicare.

Aruncați recipientul unidoză, chiar dacă a mai rămas gel, nu-l păstrați.

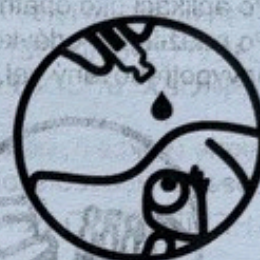

PRECAUȚII DE UTILIZARE

Verificați dacă ambalajul este intact înainte de prima utilizare: utilizați numai dacă plicurile și recipientele unidoză nu sunt deschise.

Pentru a evita contaminarea, nu atingeți vârful recipientului cu nimic.

Nu reutilizați recipientul, deoarece după ce îl deschideți, conținutul nu este protejat de contaminarea microbiană.

Trebuie să contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se îmbunătățesc.

ATENȚIONĂRI

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

După utilizare, nu conduceți vehicule și nu folosiți mașini în cazul în care vederea dumneavoastră este neclară: așteptați câteva minute până vă revine vederea clară.

Așteptați cel puțin 15 minute între utilizarea a două produse pentru ochi diferite.

THEALoz DUO GEL trebuie utilizat ultima dată.

EFACTE SECUNDARE

S-au raportat următoarele reacții adverse: posibilitatea rară de iritare ușoară a ochilor și roșeață oculară.

Când utilizați un gel pentru ochi, puteți prezenta simptome deranjante, cum ar fi senzație de arsură, senzație de înțepătură, senzație de corp străin în ochi și vedere încețoșată pentru o perioadă scurtă de timp.

Dacă observați efecte secundare sau senzații neobișnuite după utilizarea acestui produs, vă rugăm să contactați un profesionist din domeniul sănătății și să raportați informațiile către distribuitorul local, producătorul sau Autoritatea Competentă locală (consultați datele de contact de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare).

CONDITII DE DEPOZITARE ȘI DE ELIMINARE