

## Test de sarcină

Detectare rapidă

- Acuratețe de peste 99 % începând cu ziua estimată a menstruației.
- **Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.**

### 1 Înainte de a începe

Un ceas vă poate fi de ajutor în timpul testului.

Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua estimată a menstruației.

### 2 Efectuați testul

Când sunteți pregătită să efectuați testul, scoateți ambalajul extern din folie și îndepărtați capacul. Utilizați dispozitivul de testare imediat.

Puteți efectua testul direct în jetul de urină **sau** într-o mostră de urină colectată într-un recipient curat și uscat.

- Țineți vârful care își schimbă culoarea îndreptat în jos sau așezați dispozitivul de testare pe o suprafață plană până când se afișează o linie albastră în fereastra de control.
- Țineți vârful care își schimbă culoarea îndreptat în jos în jetul de urină **sau** în mostra de urină colectată, după cum se arată, timp de **5 secunde** întregi.
- Vârful cu modificare de culoare va deveni roz instantaneu, indicând faptul că se absoarbe urină. **Trebuie să continuați să țineți vârful cu modificare de culoare în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.**



- Țineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos sau așezați dispozitivul de testare pe o suprafață plană până când se afișează o linie albastră în fereastra de control.



Trebuie să continuați să țineți vârful cu modificare de culoare în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.

Începeți să cronometrați 5 secunde imediat ce observați că vârful cu modificare de culoare devine roz.

Jet de urină **SAU** Mostră colectată

- Vă recomandăm să puneți la loc capacul.
- Dacă vârful cu modificare de culoare nu devine complet roz, consultați Întrebarea 5.

3  
minute

**AȘTEPTAȚI 3 MINUTE.**

Pe măsură ce testul începe să funcționeze, veți vedea linia albastră sau liniile albastre începând să apară.

### 3 Citiți rezultatul


Puteți citi rezultatul în fereastra de rezultate.

**În fereastra de control, unde citiți rezultatul, trebuie să fie o linie albastră. Această linie arată că testul a funcționat.**

Un rezultat „Sarcină prezentă” poate apărea începând de la 1 minut, dacă efectuați testul începând cu ziua în care considerați menstruația ca fiind întârziată (prima zi după ziua estimată a menstruației).

Trebuie să așteptați să treacă toate cele 3 minute pentru a confirma un rezultat „Sarcină absentă” (consultați Întrebarea 8).

Dacă nu vedeți o linie albastră în fereastra de control, testul nu a funcționat (consultați Întrebarea 6).

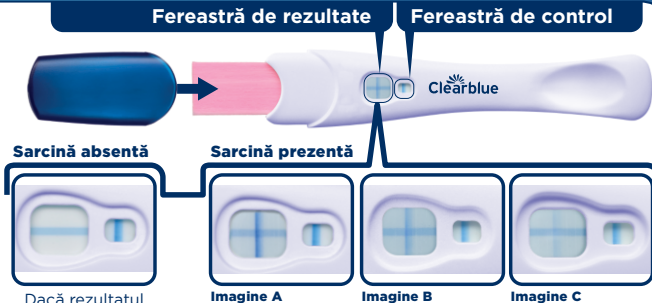

Dacă rezultatul obținut este „**Sarcină absentă**”, consultați Întrebarea 10.

- Dacă rezultatul obținut este „**Sarcină prezentă**”, consultați Întrebarea 11.
- Dacă nu sunteți convinsă de rezultat, consultați Întrebarea 7.

**Nu contează dacă una dintre liniile care alcătuiesc simbolul „+” este mai deschisă sau mai închisă decât cealaltă; rezultatul este „Sarcină prezentă”.**

**IMPORTANT!** Citiți rezultatul în următoarele **10 minute** de la efectuarea testării.

După acest interval de timp, ignorați orice modificare a rezultatului obținut.

# Întrebări și răspunsuri

- 1 Ce exactitate are Clearblue?**  
Clearblue are o exactitate de peste 99 % în testele de laborator, utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația.
- 2 Cum funcționează Clearblue?**  
Când sunteți însărcinată, organismul dvs. produce hormonul de sarcină hCG (Gonadotropină corionică umană). Cantitatea de hCG din organism crește în primele faze ale sarcinii. Testul de sarcină Clearblue Detectare rapidă poate detecta cantități infime ale acestui hormon în urina dvs. (sensibilitatea acestui test este de 25 mIU/ml).
- 3 Nu știu sigur când trebuie să încep următoarea menstruație. De unde știu când este momentul corect pentru efectuarea testului?**  
Pentru a stabili ziua estimată a menstruației, calculați durata obișnuită a ciclului dumneavoastră menstrual numărând din prima zi a menstruației până în ziua de dinaintea instalării menstruației următoare.
  - Dacă aveți cicluri menstruale neregulate, ar trebui să lăsați să treacă intervalul cel mai lung dintre ciclurile menstruale din lunile recente înainte de a efectua testul.Dacă rezultatul este „Sarcină absentă”, dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați întrebarea 10.
- 4 Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune medicală să influențeze rezultatul?**
  - Înainte de realizarea testului, citiți întotdeauna instrucțiunile fabricantului pentru orice medicament pe care îl luați.
  - Medicamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot duce la rezultate echivoce (aceste medicamente pentru fertilitate sunt administrate de obicei prin injecție și efectuarea testării prea curând după administrare poate determina un rezultat fals „Sarcină prezentă”).
  - Alte terapii pentru fertilitate (cum ar fi citratul de clomifen), analgezicele și contraceptivele hormonale (spre exemplu, pilula contraceptivă) nu ar trebui să afecțeze rezultatul.
  - Dacă ați întrerupt de curând contraceptivele pe bază de hormoni sau utilizați tratamente pentru fertilitate, precum clomifen citrat, este posibil ca ciclul menstrual să fie neregulat, ceea ce poate conduce la testarea prea timpurie.
  - Dacă ați fost însărcinată recent (chiar dacă nu ați dus sarcina la termen), este posibil să obțineți un rezultat „Sarcină prezentă” fals.
  - Sarcina ectopică, chisturile ovariene, menopauza și câteva afecțiuni medicale foarte rare pot duce la rezultate echivoce.
  - Dacă obțineți rezultatul „Sarcină prezentă”, este posibil să descoperiți mai târziu că nu sunteți însărcinată în urma pierderii naturale a sarcinii, eveniment ce poate apărea în stadiile precoce.În cazul în care obțineți rezultate neașteptate, trebuie să le discutați cu medicul dumneavoastră.
- 5 Am folosit testul de sarcină, dar vârf cu modificare de culoare nu a devenit complet roz. Ce trebuie să fac?**  
Dacă vârf cu modificare de culoare nu a devenit complet roz, este posibil să nu fi aplicat suficientă urină. Cu toate acestea, dacă linia albastră apare în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul a funcționat. Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, consultați întrebarea 6.
- 6 Am utilizat testul de sarcină, dar nu a apărut nicio linie albastră în fereastra de control. Ce trebuie să fac?**  
Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul nu a funcționat. Acest lucru se poate întâmpla dacă:

- Vârful cu modificare de culoare nu a fost ținut îndreptat în jos sau dispozitivul de testare nu a fost așezat pe o suprafață plană după aplicarea urinei.
  - A fost utilizată prea multă sau prea puțină urină.
- 7 Trebuie să prelevați mostra timp de 5 secunde.**
- 
- Trebuie să testați din nou, utilizând un dispozitiv de testare nou și având grijă să respectați instrucțiunile. Vă recomandăm să colectați o mostră de urină într-un recipient curat și uscat și să scufundați doar vârful cu modificare de culoare în urină, timp de 5 secunde.
- 7 Ce se întâmplă dacă sunt nesigură de rezultat?**
  - Pentru ca rezultatul să fie „Sarcină prezentă”, trebuie să apară o linie albastră în fereastra de control și un simbol „+” în fereastra rezultat, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului. Apariția simbolului „+” în fereastra de rezultate poate varia; cu toate acestea, liniile care compun simbolul „+” și linia din fereastra de control trebuie să aibă grosimi comparabile (consultați imaginile A - C).**Imagine A**  
Acest lucru este mai probabil să survină când sunteți însărcinată și efectuați testarea la mai mult de câteva zile după ciclul menstrual întârziat, când nivelul de hCG este mai ridicat.
- Imagine B**
- 
- Acest lucru nu este neobișnuit când sunteți însărcinată și efectuați testarea în ziua în care ciclul menstrual este întârziat sau în apropierea acesteia, când nivelul de hCG este încă relativ scăzut.
- Imagine C**
- 
- Chiar dacă este slab, totuși prezintă un rezultat Sarcină prezentă. În cazul în care încă nu sunteți sigură de rezultat, trebuie să așteptați cel puțin 3 zile înainte de a reface testul, având grijă să respectați instrucțiunile.
- Pentru ca rezultatul să fie „Sarcină absentă”, trebuie să apară o linie albastră în fereastra de control și un simbol „-” (minus) în fereastra rezultat, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului. Dacă rezultatul este „Sarcină absentă”, dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați întrebarea 10.
- 8 Când pot citi rezultatul?**  
Un rezultat „Sarcină prezentă” poate apărea începând de la 1 minut, dacă efectuați testul începând cu ziua în care considerați menstruația ca fiind întârziată (prima zi după ziua estimată a menstruației). Asigurați-vă că în fereastra de control apare și o linie albastră înainte de a citi rezultatul. **Trebuie să așteptați 3 minute pentru a confirma un rezultat „Sarcină absentă”.** Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de **10 minute**, testul nu a funcționat (consultați întrebarea 6).
- 9 Cât timp durează rezultatul?**  
Rezultatul poate fi citit oricând, după 3 minute și până la 10 minute de la efectuarea testului. După 10 minute, nu luați în seamă modificările apărute în rezultat.
- 10 Testul meu arată rezultatul „Sarcină absentă”. Ce trebuie să fac?**  
Este posibil să nu fiți însărcinată, să aveți un nivel al hormonului de sarcină insuficient de ridicat pentru a fi detectat sau să fi calculat greșit data la care are așteptată menstruația.
  - Dacă ați efectuat testul mai devreme, testați din nou în ziua în care este așteptată menstruația.
  - În cazul în care ziua în care ar trebui să se instaleze menstruația a trecut, repetați testarea peste 3 zile. Dacă rezultatul acestui test este „Sarcină absentă” și încă nu s-a instalat menstruația, consultați medicul dumneavoastră.
- 11 Testul meu arată rezultatul „Sarcină prezentă”. Ce trebuie să fac?**  
Dacă testul indică faptul că sunteți însărcinată, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătuți ce este de făcut în continuare.

Pentru pașii următori, informații și sfaturi de ordin general referitoare la sarcină, consultați site-ul nostru la: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Pentru autotestare la domiciliu. Exclusiv pentru diagnostic *in vitro*. Nu este destinat uzului intern. A nu se reutiliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra între 2 ° - 30 ° C. Dacă au fost păstrate la frigider, înainte de testare lăsați-le să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul protector din folie de aluminiu este deteriorat. A nu se utiliza după „data expirării”. Aruncați împreună cu gunoii menajeri obișnuiți. Nu dezambalati dispozitivul. Conține piese mici. Nu ingerați nicio componentă a acestui dispozitiv. În caz de înghițire accidentală, solicitați asistență medicală. Raportați către Clearblue orice vătămare cauzată de utilizarea acestui produs.

	Producător		A nu se reutiliza
	Cod lot		Consultați instrucțiunile de utilizare
	Data expirării		Limită de temperatură 2 ° - 30 ° C
	Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>		

## www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.  
Clearblue este o marcă comercială a SPD.  
© 2022 SPD. Toate drepturile rezervate.  
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION S.R.L.  
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 2A,  
Sector 2, București, România.



0123

2300560.01 08-2022