


## LISTA COMPONENTELOR

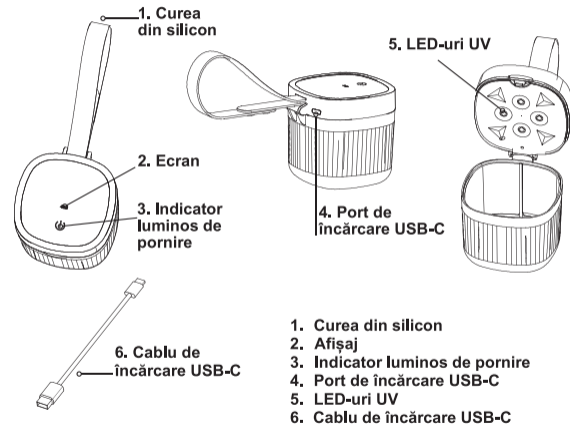

## ÎNCĂRCAREA BATERIEI


Înainte de prima utilizare, bateria trebuie să fie încărcată complet. Unitatea este alimentată de propria baterie încorporată. Conectați cablul USB-C la sursa de alimentare pentru încărcare/reîncărcare.

Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul luminos rămâne aprins în roșu.

Când bateria se încarcă, indicatorul luminos se aprinde intermitent în roșu. Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos rămâne aprins în alb și unitatea poate fi deconectată de la sursa de alimentare.

## MODUL DE UTILIZARE

1. Spălați suzeta (sau articolul de mici dimensiuni pe care doriți să îl sterilizați) pentru a curăța orice murdărie înainte de sterilizare.
2. Introduceți suzeta în unitate cu tetina orientată în sus (conform Schiței A) și închideți capacul. NOTĂ: Unitatea poate fi utilizată pentru a steriliza doar 2 suzete simultan.
3. Apăsăți butonul de pornire o dată și așteptați 49 de secunde până se aude un bip și ecranul afișează logoul 49s. La finalizarea sterilizării, unitatea emite patru bipuri. Indicatorul luminos se aprinde intermitent și se stinge automat.
4. Deschideți capacul și scoateți articolele cu mâinile curate.

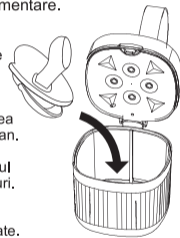

Schița A


**IMPORTANT** - în cazul în care capacul este deschis în cursul unui ciclu de sterilizare, acesta trebuie reluat. Apăsăți butonul de pornire pentru a opri unitatea și apăsați-l apoi din nou pentru a reactiva ciclul de sterilizare.



easycare®  
Healthcare Products  
baby

## Mini sterilizator UV

MODEL: TB2121

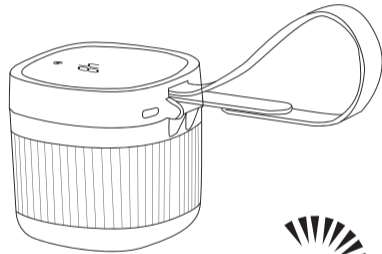

mini UV

**INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNGRIJIREA ȘI UTILIZAREA.**  
**CITIȚI ACESTE INFORMAȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE**

## AVERTISMENT! INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE SUNT IMPORTANTE. CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 16 ani sau de persoane cu capacități mintale reduse ori care nu dispun de cunoștințele sau experiența necesară. Produsul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse, atât timp cât acestea sunt sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele implicate.
- Utilizați sterilizatorul UV numai pentru scopul prevăzut, după cum este descris în acest manual.
- A nu se lăsa nicio componentă a aparatului la îndemâna copiilor. ACEST APARAT NU ESTE O JUCĂRIE.
- Nu trageți de cablul de alimentare, de sterilizator sau de oricare dintre componentele sale pentru a le deconecta de la priză.
- Nu scufundați și nu scăpați niciodată sterilizatorul sau ștecărul în apă sau orice alt lichid. Mențineți uscat dispozitivul - în caz contrar există RISC DE ȘOC ELECTRIC.
- Nu încercați să dezamblați sterilizatorul - în caz contrar există RISC DE ȘOC ELECTRIC.
- Înainte de a utiliza sterilizatorul, verificați întotdeauna să nu fie deteriorată nicio componentă. Dacă ați constatat vreo deteriorare, NU utilizați produsul.
- Nu încercați să demontați sau să reparați pe cont propriu sterilizatorul.
- Nu folosiți niciodată un dispozitiv electric dacă are un cablu sau un ștecăr deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat sau dacă a căzut în apă.

- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unor suprafețe sau aparate fierbinți, cum ar fi cuptoarele, inclusiv cele cu microunde.
- Nu întindeți mâna după niciun dispozitiv electric care a căzut în apă. Scoateți imediat aparatul din priză.
- Nu turnați apă direct în produs.
- Acest aparat conține un emițător UV. Nu priviți fix la sursa de lumină.
- Expunerea prelungită poate provoca disconfort sau leziuni ale retinei, dacă se privește direct către lumina UV.
- Radiațiile LED-urilor UV pot cauza arsuri cutanate și leziuni oculare severe.
- Nu utilizați acest aparat cu articole din latex. Articolele din latex se pot strica și degrada atunci când sunt expuse la lumina UV.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați minuțios toate componentele cu apă caldă și săpun - stoarceți excesul de apă din lavetă înainte de a șterge aparatul. Nu scufundați aparatul în apă. După curățare și înainte de prima utilizare, rulați un ciclu complet de 49 de secunde. Nu folosiți înălbitor, materiale abrazive, soluții abrazive sau soluții degresante pentru a curăța produsul. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate articolele care urmează să fie sterilizate au fost bine curățate și uscate pentru a elimina apa.

## ELIMINARE

Pentru a reduce la minimum pericolele pentru sănătate și mediu și pentru a asigura reciclarea materialelor, acest produs trebuie eliminat la o unitate de colectare selectivă pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice.

## GARANȚIE

Perioada de garanție pentru acest produs este de 24 luni sau în conformitate cu reglementările fiecărei țări de la data vânzării, cu condiția respectării stricte a condițiilor de funcționare, conform acestor instrucțiuni. Urmați cu exactitate instrucțiunile, pentru a asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Model: TB2121

Baterie Li-ion: CC 3,7 V, 500 mAh

Intrare: 5 V 1 A

Sursa de alimentare: Baterie 500 mAh, CC 3,7 V

Port de încărcare: USB-C

LED UVC: 260 - 280 nm

LED UVA: 390 - 400 nm

LED-uri UV: 3-6 mW



**Importator/Distribuitor:** Dasco Distribution Concept SRL

Șoseaua de Centură nr. 13, Mega Distribution Center, 077040, Chiajna, Jud. Ilfov, România

[www.easycare-baby.com](http://www.easycare-baby.com)

Fabricat în China